


Produktbeschreibung

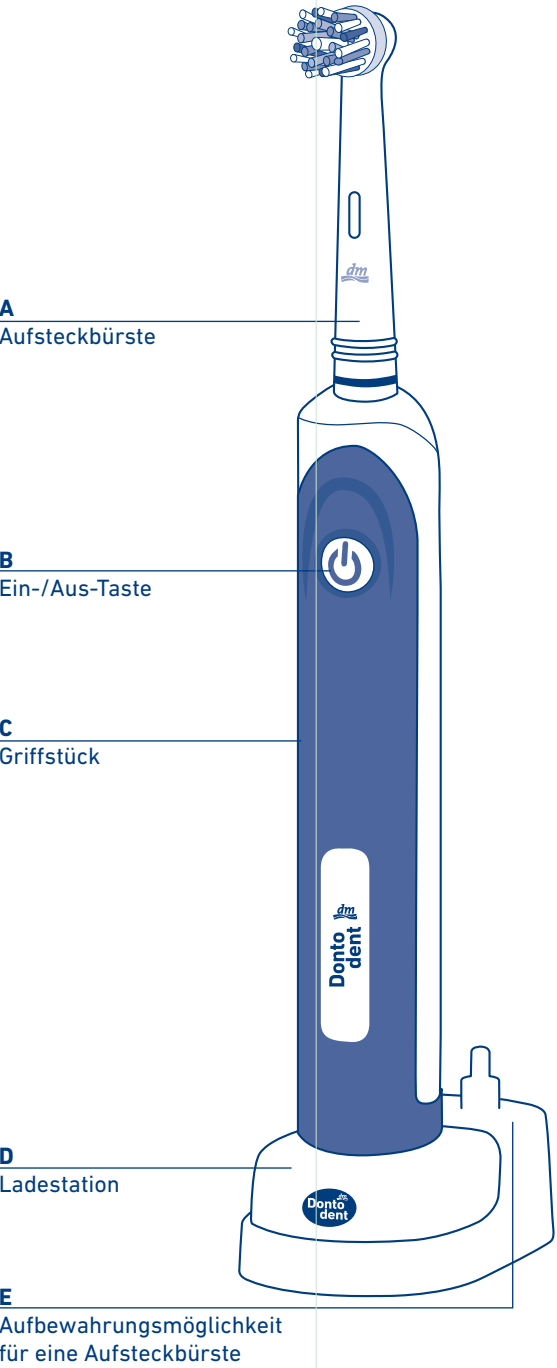

Lieferumfang

Wiederaufladbare Zahnbürste mit 1 Aufsteckbürste, Ladestation, Bedienungsanleitung mit Garantiehinweis

Sicherheitshinweise

i Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie diese an andere Nutzer weiter.

Die Dontodent Active ist nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. Kinder unter 8 Jahren sollten das Produkt nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Bei der Verwendung elektrischer Geräte, besonders in Anwesenheit von Kindern, müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, z. B. um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

- Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
- Zahnbürsten können von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 - Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien zu laden.
 - Warnung: Laden Sie die Zahnbürste ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät.
 - Die Ladegerätnummer CHG0090-002
 - Die Netzanschlussleitung des Ladegeräts kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu entsorgen.
 - Dieses Gerät enthält einen nicht austauschbaren Akku. Das Gerät sollte nur geöffnet werden, um den Akku sachgerecht zu entsorgen. Weitere Hinweise siehe Abschnitt „Entsorgung“.
 - Entnommene Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß an den vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen.
 - Entnommene Akkus von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinandernehmen.
 - Bei auslaufendem Akku den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit der Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen

- Arzt aufsuchen.
- Platzieren oder lagern Sie die Ladestation nicht in der Nähe einer Badewanne oder eines Waschbeckens.
- Legen oder tauchen Sie die Ladestation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie eine im Wasser liegende Ladestation nicht. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne.
- Verwenden Sie das Produkt nur für seinen in diesem Handbuch beschriebenen vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Nehmen Sie dieses Produkt niemals in Betrieb, wenn der Netzstecker oder das Stromkabel beschädigt ist, wenn das Produkt nicht vorschriftsmäßig funktioniert, beschädigt wurde oder in Wasser gefallen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Stromkabels mit heißen Oberflächen.
- Das Ladekabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät nicht mehr verwendet werden.
- Niemals im Schlaf oder schläfrigen Zustand verwenden.
- Lassen Sie das Gerät niemals fallen und sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in die Öffnungen gelangen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder wenn Aerosole (Sprays) verwendet oder Sauerstoff zugeführt wird.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt geeignet.
- Das Griffstück und die Ladestation nicht mit alkohol-, chlor-, wachs-, öl- oder lösungsmittelhaltigen Produkten wie z.B. Parfüm, Tages-/Sonnencreme, Body-Öl oder Nagellackentferner in Berührung bringen.

Laden und aufbewahren

i Wir empfehlen, die elektrische Zahnbürste vor der ersten Verwendung 16 Stunden vollständig aufzuladen.

- Schließen Sie die Ladestation an die Netzspannung an. Stellen Sie sicher, dass das Griffstück ausgeschaltet ist, bevor Sie es auf die Ladestation setzen. Ein kompletter Ladevorgang dauert 16 Stunden. Er ermöglicht Ihnen eine Nutzung von 7 Tagen bei 2-mal täglichem Putzen für 2 Minuten.
- Bewahren Sie die Ladestation und die Aufsteckbürste bei Nichtverwendung nicht in der Nähe von Wärmequellen, sondern an einem trockenen Ort wie einem Badezimmer-schrank auf. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Das Griffstück der Zahnbürste kann im täglichen Gebrauch auf der Ladestation stehen, ein Überladen ist nicht möglich. Aus Umweltschutzgründen wird jedoch empfohlen, die Ladestation bis zum nächsten erforderlichen Ladevorgang vom Stromnetz zu trennen.

Sicherheitsabschaltung
Bei zu schwachem Akku erfolgt eine Sicherheitsabschaltung. Nach einer Sicherheitsabschaltung ist das Gerät nach 18 Stunden wieder voll aufgeladen.

Akkupflege
Um die maximale Kapazität des Akkus zu erhalten, empfehlen wir, das Gerät alle 3 Monate so weit zu entladen, bis es sich selbst abschaltet (Sicherheitsabschaltung), und danach 18 Stunden lang vollständig aufzuladen. Auf diese Weise können Sie dem „Memory-Effekt“ /Batterie-trägheitseffekt vorbeugen, der bei häufiger Teilentladung (d. h. wenn der Akku nur zum Teil und nicht vollständig entladen wird) und Wiederaufladung entsteht und zu einem Kapazitätsverlust führt. Sollte dennoch ein Kapazitätsverlust eintreten, führen Sie den Vorgang des vollständigen Entladens und Aufladens bis zu 5 Mal durch, um den Memory-Effekt rückgängig zu machen.

Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste


- Feuchten Sie die Aufsteckbürste an und tragen Sie die Zahncreme auf.
- Führen Sie die Bürste an die Zähne, bevor Sie am Griffstück die Ein-/Aus-Taste betätigen.
- Putzen Sie nach der **KAI**-Methode, zuerst die **Kaufläche**, dann die **Außenseite** und zum Schluss die **Innenseite**.
- Setzen Sie die Aufsteckbürste ohne Druck so auf einen Zahn auf, dass ein kleiner Abstand zum Zahnfleisch bleibt. Nun putzen Sie jeden Zahn ausgehend von der Zahnmitte mit einer kleinen Drehbewegung nach links und rechts bis in den jeweiligen Zahnzwischenraum. Hierbei kann die Aufsteckbürste nun auch den Zahnfleischrand berühren und ihn massieren. Drücken Sie nicht zu fest auf.
- Nach 2 Minuten sind 4 kurze Impulse zu spüren, die das Ende der von Zahnärzten empfohlenen idealen Putzzeit anzeigen. Zahnärzte empfehlen, jeden Kieferquadranten mindestens 30 Sekunden zu putzen.

Weitere Hinweise zur Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste

- In den ersten Tagen der Verwendung kann es zu leichtem Zahnfleischbluten kommen. Falls das Zahnfleischbluten länger als 2 Wochen anhält, sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen.
- Die hellblauen Borsten an der Aufsteckbürste verblassen bei Verwendung innerhalb von ca. 3 Monaten, um den Verbraucher daran zu erinnern, die Aufsteckbürste auszutauschen. Für eine optimale Leistung empfehlen Zahnärzte, die Aufsteckbürste nach 2–3 Monaten auszutauschen.
- Aufsteckbürsten erhalten Sie in Ihrer dm-Filiale.

Reinigung

- Nach jedem Gebrauch Griffstück einschalten und Aufsteckbürste gründlich für einige Sekunden unter fließend warmem Wasser abspülen.
- Anschließend das Griffstück ausschalten, die Aufsteckbürste abziehen und beide Teile einzeln unter fließendem Wasser abspülen.

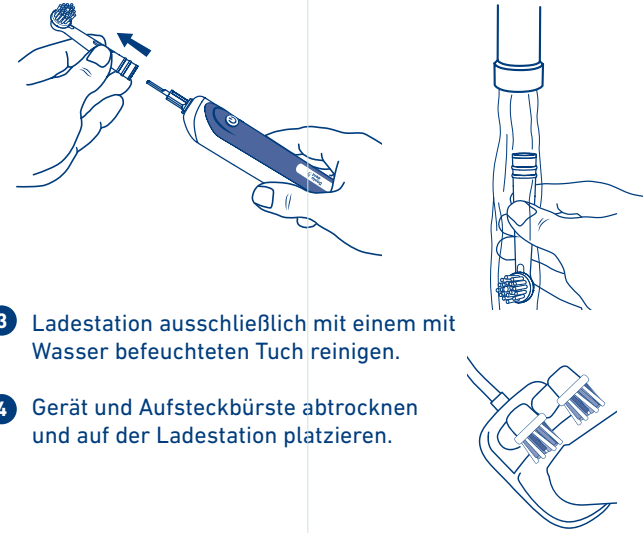

Entsorgung


Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Entsorgen das Gerät nicht im Hausmüll. Bitte recyceln oder entsorgen Sie das Gerät fachgerecht über lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Achtung! Durch das Öffnen des Griffstücks wird das Gerät zerstört.

i Das Produkt enthält Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH). Der Akku muss vor der Entsorgung des Griffstücks entfernt werden. Er kann jedoch nicht ausgetauscht werden. Bitte beachten Sie auch, dass das Gerät durch das Entfernen des Akkus unbrauchbar wird. Das Griffstück der elektrischen Zahnbürste kann nicht wieder zusammengebaut werden.

Entfernen des Akkus

- Das Entfernen des Akkus erfolgt am einfachsten, wenn die Aufsteckbürste aufgesteckt ist.
- Greifen Sie das Griffstück mit der einen und den Hals der Aufsteckbürste mit der anderen Hand. Drücken Sie die Aufsteckbürste unter sanftem Druck von der einen zur anderen Seite. Die Kappe wird sich schrittweise öffnen und kann entfernt werden.
- Klopfen Sie das offene Ende des Griffstücks so lange auf eine feste Oberfläche, bis der innere Antriebsmechanismus herausrutscht.
- Hebeln Sie den Akku aus seinem Gehäuse und durchtrennen Sie gegebenenfalls die Akkuverkabelung, um den Akkupack für das Recycling zu entnehmen.

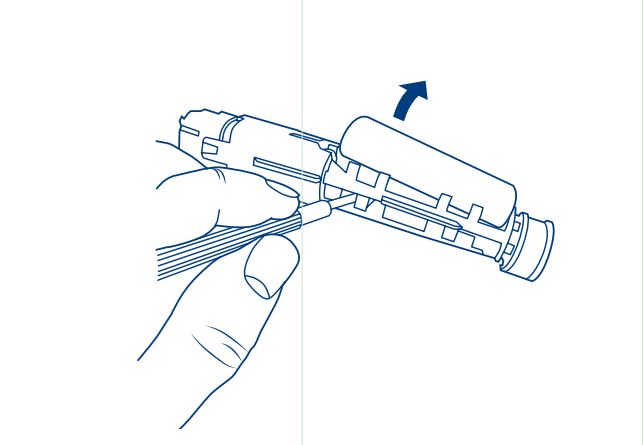

Garantie

Wir übernehmen für dieses Gerät eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir entweder durch Reparatur oder Austausch des Geräts kostenlos alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Abnutzung, insbesondere von Aufsteckbürsten, sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen.

Bei Eingriffen durch nicht autorisierte Personen sowie bei Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen erlischt die Garantie.

Im Garantiefall geben Sie das Gerät mit dem Original-Kaufbeleg bitte an die Verkaufsstelle zurück.

Diese Garantie beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise.

dm Markenqualität

Ausgabe 8.0 – von 07/2021 Änderungen vorbehalten

Dieses Produkt ist CE-zertifiziert.

CE

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden:

Kontaktaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:


dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Technische Daten
Ladegerät: Modell CHG0090-002
Eingang: 230V ~ 50 Hz
Leistung: 0,9 W
Ausgang: 3,2 V bei 50 mA
IPX7 Schutzklasse II
Zahnbürste: Modell DME
Eingang: 3,2 V bei 50 mA
IPX7 Schutzklasse III



AKKU-ZAHNBÜRSTE
ACTIVE

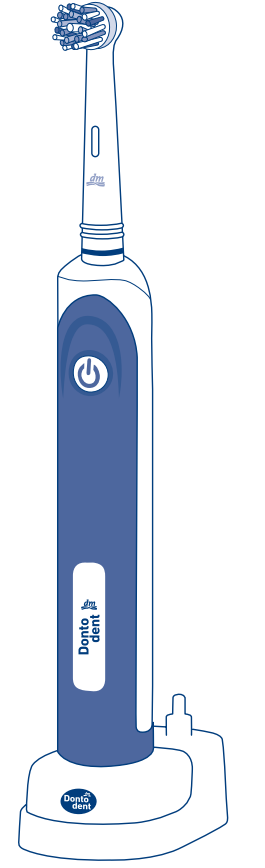

GEBRAUCHS-ANWEISUNG

