



SONIC FACIAL & BODY ROLLER | 4 IN 1



Skin Scan &
Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



Smoothing &
Tightening
Skin Massage



3D Contouring
&
Firming Waves

Pevnejšia
pokožka za pár
minút

**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



DOBRE VEDIET'

TIP 01

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite GESKE sérum alebo hydratačný krém, ktorý je špeciálne vytvorený na dosiahnutie žiarivej pleti.

TIP 02

Najlepšie výsledky dosiahnete vždy otáčaním zariadenia pohybom nahor

TIP 03

Po každom použití vyčistí svoje zariadenie čistiacim prostriedkom na zariadenia GESKE.



Vyhľadanie a spevnenie
Mladistvá plet




Massage
Glowing Skin



Zap/Vyp
Stlač na 1-2 sekundy


Doba nabíjania 2,5 h

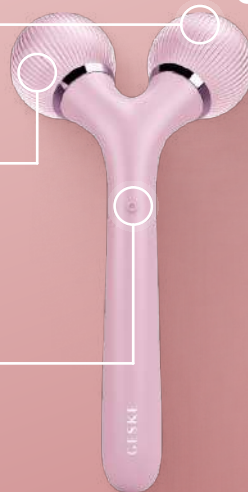

Contouring & Firming
Anti-Aging




Sonic Pulsations
Soothe & Relax

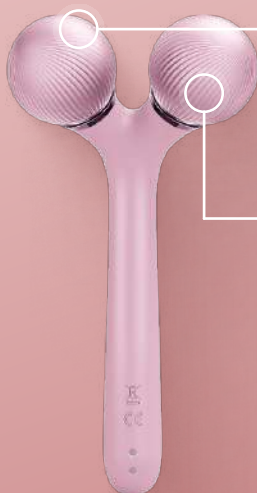

ZVLÁDNI PRVÉ KROKY

Náš inovatívny SmartAppGuided™ Sonic Facial & Body Roller | 4 in 1 je navrhnutý tak, aby viditeľne spevnil a zjemnil pokožku celého tela vrátane tváre.

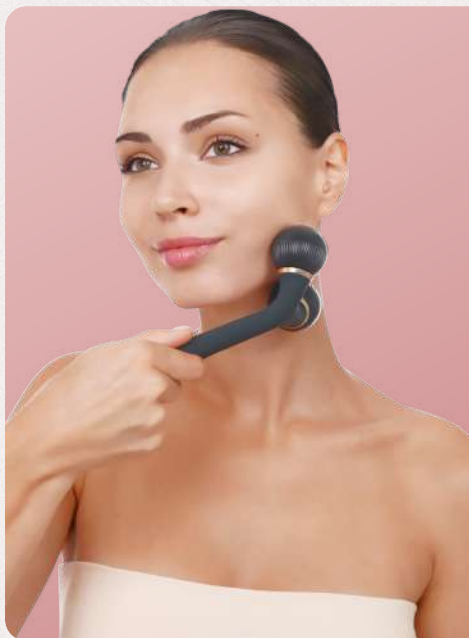

MASÁŽ TVÁRE A KRKU

PRIPRAV SA

Začni s čistou tvárou bez make-upu a nanies požadované GESKE sérum.

POWER ON


Podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy zapni technológiu SmartSonic Pulsation Technology.

MASÁŽ

Rolujte masážne guľôčky pohybom nahor po dekolte, ramenách a krku. Potom prejdite na tvár a masírujte si líca a čelo.

FINISH

Podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy zariadenie vypni. Po každom použití vyčisti svoje zariadenie čistiacim prostriedkom na zariadenia GESKE.

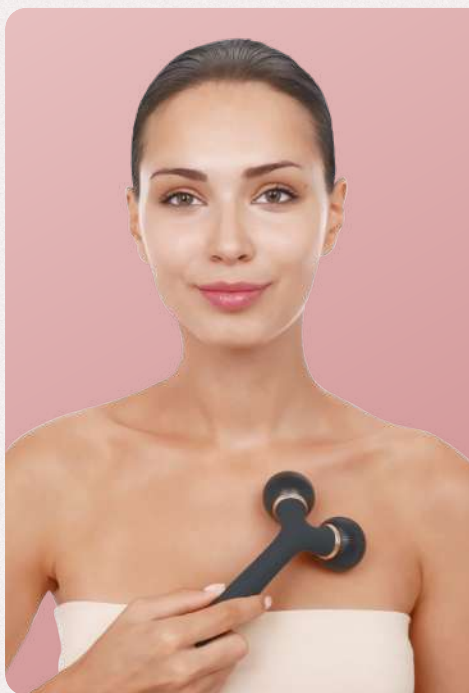

CIEĽOVÉ BODY

NECK

Začnite v spodnej časti krku a otáčajte ním pohybom smerom nahor k čelustnej kosti. Opakujte päťkrát na obe strany krku. 3D Contouring and Firming Waves umožňujú vašej pokožke spustiť jej prirodzený obnovovací proces.

DEKOLT

Rolujte zariadenie cez kľúčnu kosť smerom k ramenu. Opakujte päťkrát na obe strany tela. Technológia SmartSonic Pulsation Technology stimuluje a napína vašu pokožku.

LÍCA

Posúvajte zariadenie od brady k uchu pozdĺž čeluste. Opakujte päťkrát na obe strany tváre. Táto Smoothing and Tightening Skin Massage vám poskytne pevnú, perleťovo hladkú pokožku.

FOREHEAD

Začnite od obočia a natočte zariadenie smerom nahor k línii vlasov. Opakujte päťkrát, pokrývajúc všetky oblasti čela.

Vytvor si svoju osobnú rutinu starostlivosti o pokožku

a stiahni si našu aplikáciu GESKE



Pokročilé App



Video Vedené



Poháňané umelou inteligenciou
Skenovanie pokožky



Expert Tipy



Osobné Sprievodca



V aplikácii Odmeny



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE. PREČÍTAJ SI PRED POUŽITÍM.

Pred prvým použitím si prečítaj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie si uschovaj.

Tvoj produkt v kocke

Tvoj produkt je multifunkčný derma valček. Je bezpečné ho používať až 3-krát denne, nepoužívaj ju, prosím, častejšie. Pre maximálnu bezpečnosť a ideálne výsledky vždy dodržiuj svoju personalizovanú rutinu starostlivosti o pokožku vytvorenú aplikáciou GESKE.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Pred prvým použitím zariadenia si prečítaj tieto bezpečnostné informácie a návod na použitie ako celok. Nezabudni si uložiť kópiu oboch, pretože obsahujú dôležité informácie o bezpečnom používaní, ako aj o technických a právnych požiadavkách na informácie. Zariadenie je produktom starostlivosti o pokožku pre dospelých, a nie zdravotníckym prostriedkom ani produktom s medicínskymi alebo inými liečivými vlastnosťami. Používanie zariadenia by malo vždy zahŕňať dodržiavanie odporúčaní prispôbených aplikácií z aplikácie GESKE Beauty App.

Špecifikácie

Materiály: ABS, silikón | **Skladovacia teplota:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batéria:** Li-Ion 3,7 V | **Kapacita batérie:** 140 mAh | **Maximálny nabíjací prúd:** 140 mA | **Nabíjacie napätie:** 5 V | **Doba nabíjania:** cca. 2,5 hodiny | **Prevádzkový čas** sa líši v závislosti od aktivovaných technológií a intenzít. | **Rozhranie:** USB | **Programy:** Vibrácia, 1 intenzita

V nasledujúcich prípadoch je potrebná konzultácia s lekárom, či je prípravok pre teba vhodný:

V prípade tehotenstva. Bezpečnosť používania počas tehotenstva nebola stanovená.

Ďalšie informácie o použití:

Produkt nepoužívaj na podráždenú alebo poranenú pokožku alebo otvorené rany (po akomkoľvek poranení), v prípade bakteriálnych alebo vírusových infekcií kože (či už v mieste použitia alebo inde). Tento produkt nie je určený na liečbu kožných ochorení alebo chorôb. Ak máš zdravotné problémy s kožou alebo trpíš kožnými ochoreniami, pred použitím tohto produktu sa poraď so svojím dermatológom. Produkt nepoužívaj, ak je 1) netypicky teplý, 2) mechanicky poškodený alebo zdeformovaný, 3) sfarbený. Ak počas používania pociťš bolesť a/alebo nepohodlie, preruš používanie a vyhľadaj lekársku pomoc. Očné okolie je veľmi citlivé: V tejto oblasti buď mimoriadne opatrná a vyhní sa akémukoľvek kontaktu prípravku so samotným okom. Produkt používajte len tak, ako sa odporúča v tvojej osobnej rutine. Z hygienických dôvodov odporúčame, aby si svoj produkt nezielala s nikým iným. Produkt je určený na kozmetické použitie na tvár. GESKE nepreberá žiadnu zodpovednosť za škodlivé následky vyplývajúce z použitia na iné časti tela alebo iného nesprávneho použitia, pripojenia k nevhodným zdrojom napätia, kontaminovanej vodivej kvapaliny alebo loptičiek. Pred nabíjaním sa vždy uistí, že zástrčka a zásuvka sú úplne suché. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru. Produkt sa nesmie používať, keď je pripojený k elektrickej zásuvke.

Varovania

Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnom použití!

Produkt používaj len tak, ako je popísané v Stručnej príručke a vo videu. Ak máš ďalšie otázky, kontaktuj našu zákaznícku podporu na adrese support@geske.com.

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku požiaru/vznietenia!

Produkt nehas vodou. Nevhadzuj produkt do ohňa.

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku chybných batérií!

Nesprávna manipulácia s batériami môže spôsobiť nekontrolovanú exotermickú reakciu. V takom prípade celý výrobok ihneď a riadne zlikviduj.

Nebezpečenstvo poranenia detí!

Výrobok uchovávaj mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Kvapalina môže poškodiť nabíjací obvod a ohroziť vaše zdravie. Počas čistenia odpoj produkt od nabíjacieho kábla/obvodu.

Nebezpečenstvo poškodenia magnetickými polami!

Magnetické polia môžu ovplyvniť mechanické a elektronické komponenty, ako sú napríklad kardiostimulátory. Nepoužívaj výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Pre viac informácií kontaktuj svojho ošetrojúceho lekára. Do blízkosti produktu neumiestňuj karty s magnetickými prúžkami (napr. kreditné karty), pretože magnety produktu ich môžu poškodiť.

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku meniacich sa okolitých teplôt!

Zmena okolitej teploty (napr. po preprave) môže viesť k tvorbe kondenzácie. V takom prípade výrobok nepoužívaj, kým sa neprispôbí novej okolitej teplote. Nikdy nevystavuj výrobok priamemu slnečnému žiareniu, extrémnemu teplu alebo vriacej vode.

Bezpečné použitie až do okolitej teploty 50 °C/122 °F.

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku príliš dlhého nabíjania!

Po každom procese nabíjania odpoj nabíjací kábel z el. obvodu.



Informácie o likvidácii zariadenia a WEEE. Tento elektrický spotrebič bol prvýkrát uvedený na trh po 13. auguste 2005. V súlade s európskou smernicou WEEE a národnými predpismi sa elektrické spotrebiče a elektronické súčiastky zahrnuté v tejto dodávke nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Na konci životnosti produktu sa musia zlikvidovať na miestnom zbernom mieste, aby sa zabezpečila ekologická likvidácia.

Poznámky k lítiovým batériám/nabíjateľným batériám

V súvislosti s distribúciou batérií a nabíjateľných batérií sme v súlade s európskymi predpismi povinní informovať vás, spotrebiteľa, o nasledujúcich skutočnostiach: Batérie a nabíjateľné batérie ste zo zákona povinní vrátiť. Po použití nám ich môžete vrátiť, odniesť na zberné miesto v obci alebo bezplatne doručiť miestnemu predajcovi. Batérie a nabíjateľné batérie sú označené nasledovne:



Tieto symboly znamenajú, že vy, ako spotrebiteľ, nemôžete batérie a nabíjateľné batérie likvidovať prostredníctvom domového odpadu. Batérie a nabíjateľné batérie obsahujúce škodlivé látky sú označené jedným z týchto symbolov. Symbol pozostáva z prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach a chemického symbolu ťažkého kovu, ktorý predstavuje hlavnú znečisťujúcu látku. Podrobne vyššie uvedené symboly znamenajú: Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť

Poznámky k lítiovým batériám/nabíjateľným batériám

Lítiové batérie a lítiové nabíjateľné batérie poznáte podľa chemického symbolu „Li“. Okrem vyššie uvedených informácií by sme radi upozornili aj na nasledovné: Pri likvidácii lítiových batérií alebo nabíjateľných batérií, či už ich vrátením nám, odovzdaním na komunálne zberné miesto alebo ich odovzdaním miestnym predajcom alebo verejným spoločnostiam zaoberajúcim sa likvidáciou odpadu, sa uistite, že sú úplne vybité. Taktiež žiadame, aby ste kontaktné plochy na batérii s označením „+“ a „-“ prelepili lepiacou páskou, aby ste predišli riziku požiaru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin týmto vyhlasuje, že všetky elektronické zariadenia spĺňajú príslušné podmienky platných európskych smerníc 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Obmedzenie zodpovednosti

GESKE Beauty Tech GmbH a/alebo ich predajcovia zodpovedajú za škody spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbalým správaním GESKE Beauty Tech GmbH, zástupcu alebo sprostredkovateľa, v súlade s právnymi predpismi. GESKE Beauty Tech GmbH a/alebo ich predajcovia sú zodpovední iba za škody, ktoré možno pripísať úmyselnému alebo hrubo nedbalému správaniu, s výnimkou poškodenia života, zdravia alebo zdravia a porušenia základných zmluvných povinností (hlavných povinností). To platí aj pre nepriame škody, najmä úšľý zisk. Okrem toho je zodpovednosť voči spotrebiteľom v dôsledku prevzatých záruk, s výnimkou prípadu úmyselného alebo hrubo nedbanlivého správania alebo ak dôjde k zraneniu života, zdravia alebo zdravia a k porušeniu podstatných zmluvných povinností (hlavných povinností), obmedzená na typické, predvídateľné škody pri uzavretí zmluvy a tiež na úroveň priemerných škôd typických pre túto zmluvu. To platí aj pre nepriame škody, najmä úšľý zisk. Pokiaľ ide o spoločnosti, s výnimkou prípadu zranenia života, zdravia a zdravia alebo úmyselného alebo hrubo nedbanlivého správania spoločnosti GESKE Beauty Tech GmbH a/alebo jej predajcov, je zodpovednosť obmedzená na typické, predvídateľné škody pri uzavretí zmluvy a aj na úroveň priemerných škôd typických pre túto zmluvu. To platí aj pre nepriame škody, najmä úšľý zisk. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené: Nedodržaním tohto návodu/Neodborným použitím/Neoprávnenými zmenami/Technickými úpravami/Používaním neschválených náhradných dielov/Používaním neschváleného príslušenstva. Nároky na ručenie podľa nemeckej legislatívy o zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté.