

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate korisnička uputstva koja su priložena uz proizvod, kao i da se pridržavate navedenih preporuka.

Waterpik Inc tvrdi da ovaj proizvod nema mane u materijalu i načinu sklapanja u roku od 2 godine od datuma nabavke. ukoliko proizvod nije nepravilno upotrebljen ili fizički oštećen posle nabavke.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Proizvod koji ne bude popravljen u propisanom roku na vaš zahtev zamenićemo novim. Za vreme popravke aparata produžuje se rok saobraznosti za period od dana prijave kvara do dana popravke.

POSTUPAK REKLAMACIJE:

Ako proizvod koji ste kupili nije saobrazan Ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste proizvod kupili.

Prodavac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca konkretno predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti je moguće opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Saobraznost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

- nepoštovanja uputstva za upotrebu,
- nepravilna upotreba i održavanja aparata,
- oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika ili oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem,
- popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
- ugradnja neoriginalnih rezervnih delova,
- nemarnog rukovanja aparatom koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,
- oštećenja nastala zbog mehaničkih udaraca od strane kupca ili treće osobe,
- grešaka koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, električne struje, poplave i sl.).

RECIKLAŽA



- Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Ekskluzivni distributer za Srbiju: LAVIEFARM DOO, ul. Zrmanjska 41, 11 000 Beograd

tel: +381 11 744 0646, +381 11 744 0698; fax: +381 11 782 3133

e-mail: info@waterpik.rs

Sertifikati usaglašenosti: www.waterpik.rs/dokumenti



Datum kupovine: _____

Waterpik Ultra Water Flosser Model WP-100 / WP-112

1. Poklopac rezervoara / mesto za skladištenje nastavaka
2. Dugme za izbacivanje nastavka
3. Gumica / ventil za rezervoar
4. Dugme za uključivnja / isključivanje uređaja
5. Točkić za kontrolu vodenog pritiska (2-10)
6. Nastavak
7. Okretno dugme za kontrolu smera nastavka
8. Rezervoar (651ml)
9. Dugme za uključivanje/isključivanje vode
10. Ručica
11. Baza
12. Utičnica za struju

Specifikacija proizvoda

Pritisak: 0,689 do 6,895 bar

Impulsa u minuti: 1400


Nivoa podešavanja pritiska: 10

Kapacitet rezervoara: 651 ml

Dimenzije uređaja: 25,15 x 14,22 x 13,46 cm






Težina uređaja: 0,671 kg

Napon: 220-240V

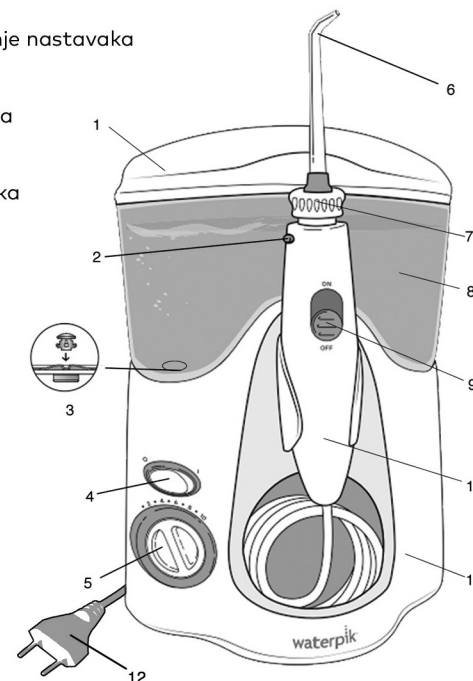

1. Oprema koja se dobija uz Waterpik Ultra Water Flosser:

- JT-100E – Waterpik® Classic Jet Tip (klasična cevčica za ispiranje, 2 komada)
- OD-100E – Waterpik® Orthodontic Tip (ortodonski nastavak za ispiranje, 1 komad)
- PS-100E – Waterpik® Plaque Seeker® Tip (čistač plaka, 1 komad)
- PP-100E – Waterpik® Pik Pocket™ Tips (nastavak za čišćenje paradontalnih džepova, 1 komad)
- TB-100E – Waterpik® Water Flosser Toothbrush Tip (nastavak u obliku četkice, 1 komad)
- TC-100E – Waterpik® Tongue Cleaner Tip (nastavak za ispiranje jezika, 1 komad)

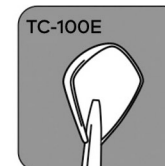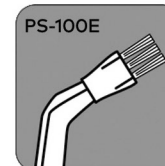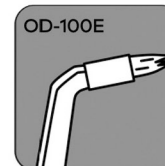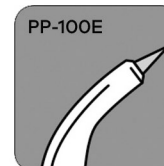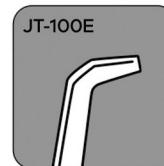

Nastavke potrebno zameniti novim na 3 do 6 meseci.

Svu dodatnu opremu za Waterpik aparate pronađite na:
www.waterpik.rs

UPUTSTVO ZA UPOTREBU APARATA *Waterpik Ultra Water Flosser WP-100, WP-112*

Waterpik Ultra oralni tuš klinički je testiran i dokazano je da je ovaj proizvod neprevaziđen u svojoj sposobnosti da masira desni i čisti teško dostupna mesta u ustima. Takođe je naučno dokazano da pomaže održavanju zdravlja vaših zuba i desni i smanjuje bakterije iz onih delova usta koja normalno pranje i drugo čišćenje ne može da dosegne.

- Upotrebljavajte ovaj proizvod samo kako je naznačeno u ovom uputstvu i preporučeno od vašeg stomatologa.

- Ako vam je vaš doktor ili kardiolog savetovao da uzimate antibiotike pre zubnog tretmana, konsultujte vašeg stomatologa pre upotrebe ovog uređaja.

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su dobili nadzor ili uputstvu vezi sa korišćenjem uređaja od strane lica odgovornih za njihovu bezbednost.

- Uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8+ godina, uz preporuku stomatologa.

- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

VAŽNO - PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA.

- Ovaj proizvod je za upotrebu u domaćinstvu.

Kada koristite električne proizvode, posebno kada su deca prisutna, zbog bezbednosti uvek treba poštovati mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

OPASNOST:

Da bi se smanjio rizik od strujnog udara:

- Nemojte rukovati utikačem mokrim rukama.
- Ne koristiti tokom kupanja.
- Nemojte stavljati ili skladištiti proizvod tamo gde može pasti ili biti uvučen u kadu ili lavabo.
- Nemojte posezati za proizvodom koji je pao u vodu. Odmah isključite.
- Proverite da li je kabl za napajanje oštećen pre prve upotrebe i tokom životnog veka proizvoda.

UPOZORENJE:

Da biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, požara ili povrede:

- Ne uključite ovaj uređaj u sistem napona koji se razlikuje od naponskog sistema navedeno na uređaju ili punjaču. Korišćenje sa neodgovarajućim naponom će oštetiti proizvod i PONIŠTITI garanciju.
- Ne usmeravajte vodu ispod jezika, u uho, nos ili druga osetljiva područja. Ovaj proizvod je sposoban za proizvodnju pritiska koji može izazvati ozbiljnu štetu na ovim delikatnim područjima i sluzokoži.
- Nemojte ispuštati ili umetati bilo kakav strani predmet u bilo koji otvor aparata ili u crevo.
- Držite električni kabl dalje od zagrejane površine.
- Koristite samo preporučene savete za korišćenje i dodatke za uređaj koje je napravio Waterpik Inc.
- Nemojte koristiti jod ili koncentrisana eterična ulja u ovom proizvodu jer njihova upotreba može smanjiti performanse uređaja i skratiti vek trajanja proizvoda. Upotreba ovih proizvoda mogu PONIŠTITI garanciju.
- U rezervoar uređaja sipajte isključivo vodu.
- Uklonite sav oralni nakit pre upotrebe ovog proizvoda.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako imate otvorenu ranu na vašem jeziku ili u ustima.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod duže od 5 minuta u svakom dvočasovnom periodu.
- Uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta kontinuirane upotrebe.
- Kabl za napajanje se ne može zameniti. Ako je gajtan oštećen, uređaj treba odložiti.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen, ili pao u vodu.

SERVIS

Električni deo Waterpik uređaja, uključujući i strujni kabl, može se servisirati samo kod ovlašćenog servisera i preko distributera, kućne popravke nisu moguće. **U slučaju da aparat ne radi ili loše funkcioniše, vratite ga prodavcu, na prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod.**

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Napunite rezervoar rastvorom vode i alkoholnog sirćeta (10:1), ostavite rastvor da stoji u rezervoaru 10ak minuta a zatim usmerite ručicu sa nastavkom u umivaonik, uključite aparat i pustite da sva voda iz rezervoara iscuri. Ovo će ukloniti tragove kamenca i omogućiti dug životni vek aparata. Uklonite nastavak sa ručice i stavite ga u mesto za čuvanje. Koristeći meku krpu i neabrazivni čistač, očistite aparat kad je potrebno.

NE POTAPAJTE GA U VODU!

- Pre čišćenja, isključite aparat iz struje.
- Ispraznite rezervoar dok ne bude potpuno prazan, pre nego ga izložite niskim temperaturama.

INSTRUKCIJE ZA RUKOVANJE

- Waterpik Ultra oralni tuš je model aparata koji **radi na struju**.

UPOTREBA Waterpik Ultra oralnog tuša

- Uklonite rezervoar sa baze. Napunite ga vodom sobne temperature. Stavite rezervoar preko baze, upotrebljavajući gumeni deo na bazi kao pozicioner za rezervoar.
- Izaberite nastavak. Gurnite nastavak u otvor na vrhu ručice dok ne klikne. Ne ispuštajte ili gurajte bilo kakav strani objekat u bilo koji otvor ili crevo.
- Okrenite dugme za kontrolu pritiska koje se nalazi na aparatu, na najmanje (na 1 ili 2) prilikom prvog korišćenja aparata. Tokom upotrebe vremenom povećavajte pritisak dok ne nađete najbolju jačinu za vas. Ako osetite bol ili primetite krvarenje, smanjite pritisak na nivo koji vam odgovara.
- Stavite nastavak u usta i usmerite prema zubima. Nagnite se preko umivaonika sa usnama blago zatvorenim oko prskalice. Sa slobodnom rukom uključite 0/1 prekidač. Mlaz iz prskalice će krenuti za sekund. Možete privremeno zaustaviti mlaz pritiskajući dugme za pauzu na ručici.
- Usmerite mlaz duž desni pod pravim uglom skoro dodirujući zube. Pustite da voda teče iz vaših usta u umivaonik. Sistematski usmeravajte mlaz oko gornjih i donjih zuba, sa pauzom da očistite prostor između zuba. Pazite da ne usmerite vodu ispod jezika, u uho, nos ili drugo delikato područje. Ovaj proizvod može prouzrokovati pritisak koji može dovesti do ozbiljnih oštećenja osetljivih područja.
- Kada završite sa irigacijom vaših zuba, slobodnom rukom pritisnite 0/1 prekidač.
- Uklonite nastavak pritiskajući dugme na ručici i izvlačeći prskalicu iz ručice irigatora. Stavite ručicu na mesto predviđeno za to. Isključite aparat kad nije u upotrebi.

waterpik waterflosser WP-100 i WP-112 Model Ultra

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


1 Priprema rezervoara



Odvojite rezervoar od baze i napunite vodom sobne temperature.

Vratite rezervoar na bazu i čvrsto pritisnite.

2 Postavljanje nastavka

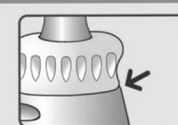

Pritisnite snažno nastavak na ručicu. Kada je nastavak pravilno postavljen nema razmaka između kontrolnog dugmeta i ručice.

3 Prva upotreba

Pre prvog korišćenja uređaja: Podesite pritisak na najveću brzinu, uperite ručicu i nagnite u lavabo, zatim uključite.



4 Podešavanje pritiska i pauza

Podesite pritisak na **najslabiji**. Postepeno pojačavajte do željenog pritiska.

Možete trenutno zaustaviti vodu pritiskom dugmeta na ručici.



5 Korišćenje Waterpik aparata

Uvek držite nastavak u ustima pre uključivanja.

Nagnite se nad umivaonik i zatvorite usne dovoljno da sprečite prskanje, a da ujedno ispuštate vodu iz usta u umivaonik.

Uključivanje uređaja na dugme.




Nastavak postavite iznad desni pod uglom od 90°



Počnite od zadnjih zuba, pratite desni prema napred, pravite kratke pauze na prostoru između zuba. Nastavite sa čišćenjem dok svi delovi oko i između zuba ne budu očišćeni.

6 Uklanjanje nastavka

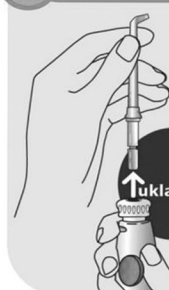

Pritisnite malo dugme na ručici. Kontrolno dugme će iskočiti i osloboditi nastavak. **Upozorenje:** Ne pritiskajte dugme dok aparat radi.



Uvoznik i distributer



LAVIEFARM

Laviefarm d.o.o. Zrmanjska 41, 11000 Beograd
tel: 011 786 3440, 011 744 0646, Fax: 782 3133
www.waterpik.rs