

SCHALL-ZAHNBÜRSTE SONIC POWER: GEBRAUCHSANWEISUNG

Sicherheitshinweis



Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

Die Dontodent Sonic Power ist nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. Kinder unter 8 Jahren sollten das Produkt nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

GEFAHR: Bei der Verwendung elektrischer Geräte, besonders in Anwesenheit von Kindern, müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, z. B. um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Verwenden Sie das Gerät nur im Haushalt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
- Stellen Sie das Ladegerät nicht über Badewannen oder Waschbecken, da es hineinfallen könnte.
- Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie nicht nach einem Ladegerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Das Ladegerät nicht mit nassen Händen anfassen.
- Das Ladegerät vor dem ersten Gebrauch und über die Lebensdauer des Produkts regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen.



ACHTUNG

So reduzieren Sie die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen:

- Dieses Gerät enthält eine Akku-Batterie, die nicht austauschbar ist. Nachdem die Akku-Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden. Durch das Öffnen des Handstücks wird das Gerät zerstört und die Garantie verfällt.
- Bei beschädigten oder auslaufenden Batterien den Kontakt mit Haut oder Augen vermeiden. Bei Kontakt umgehend ausreichend mit Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.

- Dieses Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die elektrische Zahnbürste oder das Ladegerät beschädigt sind, wenn sie nicht richtig funktionieren oder wenn das Gerät herunter- oder ins Wasser gefallen ist.
- Das Stromkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Gerät entsorgt werden.
- Dieses Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben oder wie von Ihrem Zahnarzt empfohlen verwenden.
- Keine Fremdkörper in Öffnungen des Produkts eindringen lassen oder einführen.
- Ladegerät und Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Dieses Produkt nicht im Freien und nicht an Orten betreiben, an denen Aerosol-Produkte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Vor der Verwendung dieses Produkts jeglichen Mundschmuck entfernen.
- Nicht verwenden, wenn Sie eine offene Wunde auf der Zunge oder im Mund haben.
- Wenn Ihr Arzt Ihnen empfohlen hat, vor zahnärztlichen Eingriffen eine antibiotische Prämedikation zu erhalten, sollten Sie Ihren Zahnarzt konsultieren, bevor Sie diese Zahnbürste oder andere Hilfsmittel zur Mundhygiene verwenden.
- Von der Verwendung durch Kinder unter 4 Jahren wird abgeraten. Zahnbürsten dürfen von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Pflege dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Nur zum Zähneputzen geeignet. Nicht auf der Bürste kauen oder in sie beißen. Nicht als Spielzeug oder ohne die Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde.
- Das Gerät oder die Batterie keinen extremen Temperaturen aussetzen. Die empfohlene Umgebungstemperatur für das Laden, die Aufbewahrung und den Standardbetrieb liegt über 5 °C und unter 35 °C.
- Bitte beachten, dass die Kontaktflächen des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Zum Wiederaufladen des Akkus darf nur das mit dem Gerät gelieferte abnehmbare Ladegerät  SCHG01-EU verwendet werden.
- Das Gerät niemals in einem schläfrigen Zustand verwenden.
- Das Griffstück und die Ladestation nicht mit alkohol-, chlor-, wachs-, öl- oder lösungsmittelhaltigen Produkten wie z. B. Parfüm, Tages-/Sonnencreme, Body-Öl oder Nagellackentferner in Berührung bringen.

WEITERE WARNHINWEISE:

- Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Zahnarzt, wenn bei Ihnen in den letzten 2 Monaten eine Mund- oder Zahnfleischoperation durchgeführt wurde.
- Bitte wenden Sie sich an einen Zahnarzt, wenn nach der Anwendung dieses Produkts übermäßige Blutungen auftreten oder nach 2 Wochen Anwendung weiterhin auftreten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr und wenden Sie sich an einen Arzt/Zahnarzt, wenn nach der Anwendung Beschwerden oder Schmerzen auftreten.
- Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, wenn Sie sonstige medizinische Anliegen haben.

ELEKTROMAGNETISCHE FELDER:

- Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Normen und Vorgaben hinsichtlich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.
- Wenn Sie einen Schrittmacher oder andere implantierte Geräte verwenden, sollten Sie vor der Anwendung Ihren Hausarzt konsultieren.

WARNHINWEIS: ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE

ERSTE SCHRITTE: LADEN IHRER ELEKTRISCHEN ZAHNBÜRSTE:

Vor dem ersten Gebrauch sollte die elektrische Zahnbürste 16 Stunden lang vollständig aufgeladen werden.

1. Stecken Sie das Ladegerät an einer geeigneten zweipoligen Steckdose an. Vergewissern Sie sich, dass das Handstück ausgeschaltet ist, bevor Sie es auf das Ladegerät stellen. Ein vollständiger Ladezyklus dauert 16 Stunden. Er ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 21 Tagen bei zweimaligem 2-minütigem Zähneputzen im Clean-Modus bei moderater Intensität.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Handstück und das Ladegerät vollständig trocken sind, bevor Sie das Ladegerät in die Steckdose stecken.

2. Sobald sich das Handstück auf dem Ladegerät befindet, beginnt das Licht der Ladestandsanzeige weiß zu pulsieren.
3. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet das Licht der Ladestandsanzeige für 10 Sekunden stetig weiß und schaltet sich dann ab.

Hinweis: Stecken Sie das Ladegerät aus der Steckdose aus, wenn kein Ladevorgang ausgeführt wird, um einen möglichen Kontakt mit Wasser und damit eine Beschädigung zu vermeiden.


Siehe „Beschreibung der Anzeigeleuchten (Akku, Ladezustand, Modus)“ für weitere Einzelheiten.

VERWENDUNG IHRER ZAHNBÜRSTE:

Befeuchten Sie den Bürstenkopf und geben Sie etwas Zahnpasta darauf. Legen Sie den Bürstenkopf an den Zähnen an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Gehen Sie vorsichtig von Zahn zu Zahn vor, indem Sie zuerst die Außenfläche, dann die Innenfläche und schließlich die Kaufläche jedes Zahns reinigen. Achten Sie darauf, sowohl das Zahnfleisch als auch die Zähne zu putzen. Drücken Sie beim Zähneputzen nicht zu fest auf und führen Sie den Bürstenkopf langsam von Zahn zu Zahn.

Für eine optimale Leistung des Akkus wird empfohlen, die Zahnbürste mindestens alle 6 Monate vollständig zu entladen.

Hinweis: In den ersten Tagen der Anwendung können leichte Blutungen auftreten. Wenn die Blutungen länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Zahnarzt konsultieren.

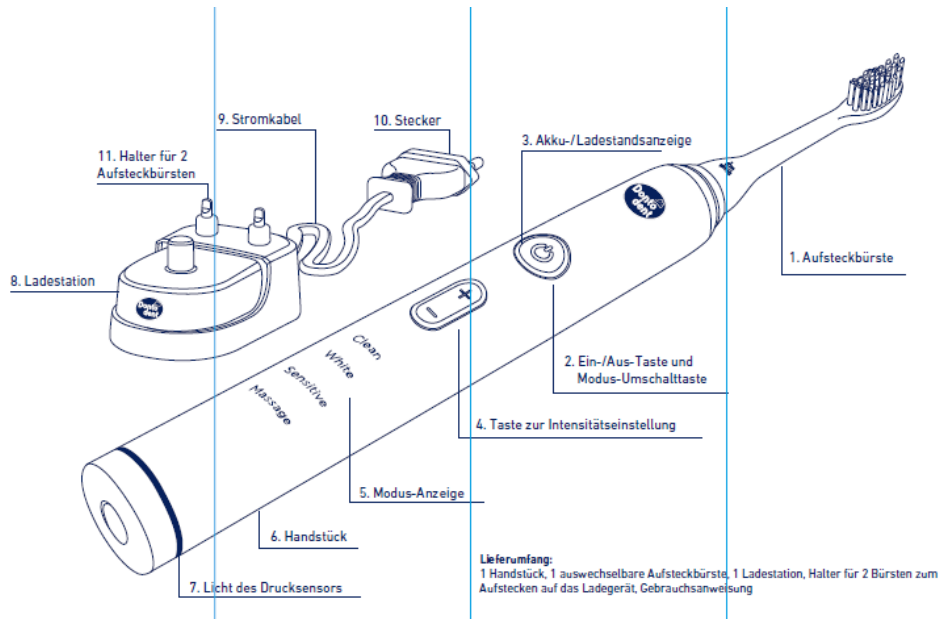

Produktbeschreibung:

1. Aufsteckbürste
2. Ein-/Aus-Taste und Modus-Umschalttaste
3. Akku-/ Ladestandsanzeige
4. Taste zur Intensitätseinstellung
5. Modus-Anzeige
6. Handstück
7. Licht des Drucksensors
8. Ladestation
9. Stromkabel
10. Stecker
11. Halter für 2 Aufsteckbürsten

Lieferumfang:

1 Handstück, 1 auswechselbare Aufsteckbürste, 1 Ladestation, Halter für 2 Bürsten zum Aufstecken auf das Ladegerät, Gebrauchsanweisung

Beschreibung der Tasten:

Ein-/Aus-Taste und Modus-Wahltaste:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Zahnbürste einzuschalten. Drücken Sie nach dem Einschalten der Zahnbürste die Taste innerhalb von 3 Sekunden kurz, um den Modus zu wechseln. Der Modus wird durch den erleuchteten Namen auf der Zahnbürste angezeigt.

Taste zur Intensitätseinstellung:

Nach dem Einschalten der Zahnbürste und der Auswahl des Reinigungsmodus können Sie die angemessene Putzintensität wählen, indem Sie auf die Taste zur Intensitätseinstellung drücken.

Das Licht um die Ein-/Aus-Taste wird je nach gewählter Intensitätseinstellung heller oder dunkler. Es gibt 3 Intensitätseinstellungen:

1. Volle Helligkeit: Höchste Intensität.

2. Mittlere Helligkeit: Moderate Intensität.
3. Geringe Helligkeit: Niedrigste Intensität.

Beschreibung der Modi:

Modus Clean: Putzdauer 2 Min, Bewegungen bis zu 35.500/Min., Bürstenkopfbewegungen: Regelmäßige und kontinuierliche Bewegungen, Anzahl der Geschwindigkeitsstufen 3, Drucksensor Ja

Modus White: Putzdauer 2 Min, Bewegungen bis zu 35.500/Min., Bürstenkopfbewegungen: Kontinuierlicher Wechsel von 2 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, Anzahl der Geschwindigkeitsstufen 3, Drucksensor Ja

Modus Sensitive: Putzdauer 3 Min, Bewegungen bis zu 35.500/Min., Bürstenkopfbewegungen: Langsamere (als im Clean-Modus) und kontinuierliche Bewegungen, Anzahl der Geschwindigkeitsstufen 3, Drucksensor Ja

Modus Massage: Putzdauer 2 Min, Bewegungen bis zu 35.500/Min., Bürstenkopfbewegungen: Stufenweiser Wechsel von niedriger zu hoher Geschwindigkeit, Anzahl der Geschwindigkeitsstufen 3, Drucksensor Ja

Anmerkung zu Modus und Intensität:

Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion, die den zuvor verwendeten Modus und die Intensitätseinstellung speichert. Wenn Sie das Handstück einschalten, fährt es im selben Modus und mit derselben Intensitätseinstellung fort, die Sie zuvor eingestellt hatten.

Beschreibung der Timer:

1. 2- bzw. 3-Minuten-Timer: Je nach ausgewähltem Modus beträgt die Putzzeit entweder 2 oder 3 Minuten (siehe vorstehende Beschreibung der Modi).
2. 4-Quadranten-Timer: Nach jeweils 30 Sekunden (oder 45 Sekunden im Sensitive-Modus) spüren Sie 3 kurze Impulse (diese markieren den Zeitraum, den Sie benötigen, um ein Viertel Ihres Mundes zu reinigen). Nun können Sie mit dem nächsten Quadranten Ihres Mundes fortfahren.

Nach 2 Minuten Putzzeit (der von Zahnärzten empfohlenen Zeitspanne) spüren Sie 5 kurze Impulse, bevor sich die Zahnbürste automatisch abschaltet.

Beschreibung der Anzeigeleuchten (Akku, Ladezustand, Modus):

Akkustandsanzeige:

1. Leuchtet weiß: Die Zahnbürste ist vollständig geladen.
2. Leuchtet orange: Der Akkustand der Zahnbürste ist niedrig und das Gerät muss geladen werden. Die Akkustandsanzeige leuchtet nach dem Abschalten für 15 Sekunden orange.
3. Blinkt orange: Der Akku der Zahnbürste ist leer und wird sich demnächst abschalten. Bitte laden Sie die Zahnbürste so bald wie möglich auf, um Schäden zu vermeiden. Die Akkustandsanzeige blinkt nach dem Abschalten für 15 Sekunden.

Modus-Anzeige:

Beim Einschalten Ihrer Zahnbürste wird der ausgewählte Modus durch das Aufleuchten des entsprechenden Namens am Handstück angezeigt.

Ladestandsanzeige:

Der Leuchtring um die Ein-/Aus-Taste pulsiert, bis die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist.

Beschreibung des Drucksensors:

Wenn Sie beim Zähneputzen zu viel Druck ausüben, blinkt das Licht des Drucksensors am Fuß des Handstücks rot. Wenn der Druck reduziert wird, wechselt das rote Licht wieder zu weiß.

Zahnfleischschutz-Funktion:

Hinweis: Vor der erstmaligen Verwendung ist die „Zahnfleischschutz“-Funktion automatisch aktiviert. Wenn Sie beim Putzen zu viel Druck ausüben, blinkt das Licht des Drucksensors rot und die Leistung der Zahnbürste wird automatisch und kontinuierlich bis auf ungefähr 50 % reduziert, um Ihr Zahnfleisch zu schützen.

Ausschalten der „Zahnfleischschutz“-Funktion: Drücken Sie auf das „Minus“-Zeichen auf der Taste zur Intensitätseinstellung und halten Sie diese Taste für 5 Sekunden gedrückt. Das Licht des Drucksensors blinkt 5 Mal weiß.

Einschalten der „Zahnfleischschutz“-Funktion: Drücken Sie auf das „Plus“-Zeichen auf der Taste zur Intensitätseinstellung und halten Sie diese Taste für 5 Sekunden gedrückt. Das Licht des Drucksensors blinkt 5 Mal rot. Wenn Sie beim Putzen zu viel Druck ausüben und die „Zahnfleischschutz“-Funktion abgeschaltet ist, blinkt das Licht des Drucksensors rot und Sie spüren lediglich eine Vibration.

Sicherheitsabschaltung:

Wenn der Akkustand unter 2 % liegt, könnte die Zahnbürste möglicherweise beschädigt werden; es erfolgt daher eine Sicherheitsabschaltung. In diesem Fall funktionieren die Leuchten nicht mehr und die Zahnbürste muss für 16 Stunden wieder aufgeladen werden, bevor sie erneut verwendet werden kann.

Reinigen Ihrer Zahnbürste und des Ladegeräts:

Wichtig: Reinigen Sie Ihre Zahnbürste nach jedem Gebrauch.

1. Ziehen Sie den Bürstenkopf vom Handstück ab.
2. Spülen Sie das Handstück und die Aufsteckbürste separat gründlich ab.
3. Lassen Sie beide Teile an der Luft gut trocknen.
4. Stecken Sie die Aufsteckbürste vor der nächsten Verwendung wieder auf das Handstück.
5. Wischen Sie das Ladegerät ab und stellen Sie die Zahnbürste wieder darauf.

Hinweis: Sie können die Aufsteckbürste an einem der beiden Halterungen an der Ladestation aufbewahren.

Aufbewahrung Ihrer Zahnbürste und des Ladegeräts:

Bewahren Sie das Ladegerät an einem trockenen Ort fern von etwaigen Wärmequellen auf. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Zahnbürsten-Ladegerät.

Austauschen der Aufsteckbürste:

1. Um die Aufsteckbürste zu befestigen, setzen Sie das Loch im Sockel der Aufsteckbürste auf den Metallstift am Handstück.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Borsten der Aufsteckbürste nach vorne zu der Seite zeigen, an der sich die Ein-/Aus-Taste am Handstück befindet.
3. Drücken Sie die Aufsteckbürste nach unten, bis sie einrastet.
4. Hinweis: Nach dem Aufsetzen sollte zwischen dem oberen Abschluss des Handstücks und der Unterseite der Aufsteckbürste ein schmaler Spalt bleiben.
5. Ziehen Sie die Aufsteckbürste nach oben, um diese vom Handstück zu entfernen.

Wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden sollte:

Die Indikatorborsten der Aufsteckbürste verblassen nach etwa 3 Monaten Anwendung (die von Zahnärzten empfohlene Zeit, nach welcher der Zahnbürstenkopf ausgetauscht werden sollte). Wenn dies geschieht, sollten Sie die Aufsteckbürste ersetzen.

Hinweis: Es wird empfohlen, nur Ersatz-Aufsteckbürsten von Dantodent zu verwenden. Bitte überprüfen Sie die Liste der kompatiblen elektrischen Zahnbürsten sorgfältig, bevor Sie Ihre Ersatz-Aufsteckbürsten kaufen.

Entfernen und recyceln des Akkus:

WICHTIG: Zerlegen Sie das Produkt nicht, wenn Sie nicht den Akku entsorgen möchten. Durch das Öffnen des Handstücks wird das Gerät zerstört und die Garantie verfällt.

Wenn die Zahnbürste nicht mehr funktioniert oder beschädigt wurde, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um den Akku sicher für die Entsorgung zu entfernen:

1. Entladen Sie den Akku, bevor Sie diesen herausnehmen.
2. Verwenden Sie Schutzkleidung (wie Handschuhe, Sicherheitsbrille usw.), um direkten Hautkontakt mit Akku-Batterien zu vermeiden, aus denen Flüssigkeit austreten könnte.
3. Drehen Sie die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn
4. Ziehen Sie die Endkappe ab
5. Klappen Sie die Bodeneinheit nach oben
6. Entnehmen Sie den Akku und achten Sie dabei darauf, bei der Handhabung den positiven + und negativen - Kontakt nicht kurzzuschließen.
7. Isolieren Sie die Endkontakte (z. B. mit Klebeband) und geben Sie den Akku zur Entsorgung in einen Kunststoffbeutel.
8. Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

Garantie:

Wir übernehmen für dieses Gerät eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir entweder durch Reparatur oder Austausch des Geräts kostenlos alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsmängeln beruhen.

Von der Garantie ausgenommen sind:

Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Abnutzung, insbesondere von Aufsteckbürsten, sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen.

Diese Garantie erlischt, wenn unbefugte Personen Reparaturen an dem Gerät vornehmen oder das Gerät öffnen und wenn keine Originalteile verwendet werden.

Im Garantiefall geben Sie das Gerät mit dem Original-Kaufbeleg bitte an die Verkaufsstelle zurück. Diese Garantie beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise.

Entsorgung



Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass so gekennzeichnete Geräte der Richtlinie 2012/19/EU unterliegen und keinesfalls mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte recyceln oder entsorgen Sie das Gerät fachgerecht über lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

In Deutschland gilt: Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind gesetzlich dazu verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro-/Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen.

Diese Pflicht besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Demnach können Sie entsprechende Elektroaltgeräte, zu deren Rücknahme wir verpflichtet sind, auch gerne kostenfrei in jeder unserer dm-Filialen innerhalb der Öffnungszeiten zurückgeben. Auf Verlangen des Endnutzers muss der Vertreiber auch ohne Kauf eines Elektro-/Elektronikgerätes bis zu drei Altgeräte einer Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurücknehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten alle Lager- und Versandflächen für Elektro-/Elektronikgeräte als Verkaufsfläche.

Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Altgeräte mit Altakku/-batterien, die nicht vom Gerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe von diesen zu trennen und einer entsprechenden Sammlung zuzuführen. Bei zu entsorgenden Altgeräten, welche gespeicherte personenbezogene Daten enthalten, liegt die Verantwortung des Löschens vor der Entsorgung bei Ihnen als Endnutzer. Das Gerät, auf das sich dieser Beipackzettel bezieht, enthält keinen Datenspeicher.

Ausgabe 1.0 – von 05/2024

Änderungen vorbehalten

Dieses Produkt ist CE-zertifiziert.



Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden:

Kontakt Daten Hersteller, Servicestelle und Impressum:

GERÄTEHERSTELLER:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe www.dm.de,
servicecenter@dm.de

Vertrieb in Österreich:

dm drogerie markt, AT-5071 Wals www.dm.at, kundenservice@dm.at

Hergestellt in China

TECHNISCHE DATEN: ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE:

Modell: K1676LIR Eingang: 3.6 V Akkutyp: Li-Ion

Wasserdichtheit: IPX7 Protection.

Der Akku kann herausgenommen werden. Der Akku kann nicht ausgetauscht werden.

Erhaltungsladung - Leistungsverbrauch im Standby-Modus 0,4 W

LADEGERÄT:

Modell: SCHG01-EU Eingang: 230 V ~ AC 50 Hz Leistung: 1 W

Ausgang: 50 mA

Wasserdichtheit: IPX7 Protection Class II

Leistungsverbrauch im Standby-Modus 0,4 W

INFORMATIONEN ZUR AKKU-BATTERIE:**Batterieerzeuger:**

Huizhou Highpower Technology Co., Ltd Xihu Industrial Zone, Ma'an Town, Huicheng
District, Huizhou City, Guangdong Province, P.R. China

www.highpowertech.com

UNION LITHPLUS ENERGY (LIAONING) CORP

No. 13, Guangtong Road, Lishan District, Anshan, Liaoning, 114045, China

<http://www.lithplus.com>

Batterieeinführer:

Perrigo Supply Chain International DAC The Sharp Building, 10-12 Hogan Place, Dublin 2, D02
TY74, Ireland

Vertrieb in Deutschland:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe www.dm.de,
servicecenter@dm.de

Vertrieb in Österreich:

dm drogerie markt, AT-5071 Wals

www.dm.at, kundenservice@dm.at