



CONDOMS FOR YOUR SIZE



Karex Industries Sdn. Bhd.
PTD. 7906 & 7907,
Taman Pontian Jaya,
Batu 34, Jalan Johor,
82000 Pontian,
Johor Darul Takzim, Malaysia.



Advena Ltd.
Tower Business Centre,
2nd Flr., Tower Street, Swatar,
BKR 4013 Malta.



0123 EN ISO 4074

REVISION DATE:
MAY 2020 (V.1)

MASTER REFERENCE INFORMATION:
K-IFU-01 (V.1)

EN Additional Information Condoms:

1. For contraception and prevention of sexually transmitted infections. 2. Handle carefully, when removing from package avoid damage by fingernails, jewellery etc. 3. Do not use the condom if the rubber material is sticky or brittle or the individual container is obviously damaged. 4. If being damaged replace an individual container by a new one and discard the old one. 5. Ask a doctor or pharmacist about compatibility of any topical medicines in possible contact with condom. 6. If extra lubrication is needed, use water-based lubricants and never oily ones like petroleum jelly, baby oil, body lotion, massage oil, butter, margarine usw. 7. Place condom on erect penis before any contact between penis and partner body occurs to assist preventing STIs or pregnancy. 8. Stop if you feel condom slipping off or tightening excessively onto penis because of breakage danger. 9. Withdraw penis soon after ejaculation by holding condom in place at penis base. 10. Should a condom burst or leak during use seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 h. 11. Dispose used condom into closed rubbish bin, not into toilet. 12. Don't use twice, reuse might increase risk of failure or infection. 13. Normal condoms are for vaginal use only, not anal sex. 14. NR-Latex might cause allergic reaction incl. anaphylactic shock. 15. **LOOVARA** condoms are a reliable protection, but no contraceptive can protect 100% against pregnancy, AIDS and/or infectious diseases. 16. Store in a cool dry place away from direct sunlight. Keep away from children. Can choke or suffocate on uninflated or broken condom fragments. 17. Use of condom during oral sex increase the risk of asphyxiation or choking. 18. Condom is a medical device to be used by lay persons - adult male or female. 19. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. 20. These condoms conform to International standards ISO 4074/ EN ISO 4074.

DE Zusätzliche Informationen Kondome:

1. Zur Verhütung und Vorbeugung sexuell übertragbarer Infektionen. Vorsichtiger handhaben und beim Auspacken Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck etc. vermeiden. 2. Bei Beschädigung ein neues Kondom nehmen und das andere entsorgen. 3. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn das Gummimaterial klebrig oder spröde ist oder die einzelne Verpackung offensichtlich beschädigt ist. 4. Falls beschädigt, ersetzen Sie einen einzelnen Behälter durch einen neuen und entsorgen Sie den alten. 5. Fragen Sie einen

Arzt oder Apotheker, ob angewendete Medikamente im möglichen Kontakt mit Kondomen kompatibel sind. 6. Wenn zusätzliches Gleitmittel benötigt wird, verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis, jedoch niemals auf Ölbasis wie Vaseline, Babyöl, Körperlotion, Massieren Sie Öl, Butter, Margarine usw. 7. Ziehen Sie das Kondom vor jedem sexuellen Kontakt über den erigierten Penis, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft zu schützen. 8. Hören Sie auf, wenn Sie merken, dass das Kondom rutschig oder gespannt und überprüfen Sie es wegen Rissgefahr. 9. Direkt nach der Ejakulation den Penis zurückziehen und das Kondom am Penisansatz festhalten. 10. Sollte ein Kondom bei der Benutzung reißen oder ein Loch auftreten, nehmen Sie bitte schnellstens, spätestens innerhalb von 72 h, medizinische Hilfe in Anspruch. 11. Werfen Sie gebrauchte Kondome nicht ins WC, sondern in den Abfall. 12. Nicht 2x benutzen, Wiederverwendung kann die Risiken von Versagen oder Infektion erhöhen. 13. Normale Kondome sind ausschließlich für den vaginalen Gebrauch bestimmt. Nicht für Analsex. 14. NR-Latex kann allergische Reaktionen auslösen inkl. anaphylaktischen Schocks. 15. **LOOVARA** Kondome sind ein zuverlässiger Schutz, jedoch bietet kein Verhütungsmittel 100% igen Schutz vor Schwangerschaft, AIDS und/oder Infektionskrankheiten. 16. An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Von Kindern fernhalten. Erstickengefahr durch aufblasende oder kaputte Kondome. 17. Die Verwendung von Kondomen beim Oralsex erhöht die Erstickengefahr. 18. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für Laien - erwachsene Männer oder Frauen. 19. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist. 20. Diese Kondome entsprechen den internationalen Normen ISO 4074 / EN ISO 4074.

FR Plus d'informations sur les préservatifs:

1. Pour la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles. 2. Manipuler avec soin le produit et éviter de l'endommager avec vos ongles, bijoux, etc., en le débarrassant. 3. Ne pas utiliser le préservatif si le matériau en caoutchouc est collant ou est fragile ou l'emballage individuel est manifestement endommagé. 4. Si le préservatif est endommagé, le jeter et en utiliser un neuf. 5. Demandez conseil à un médecin ou un pharmacien au sujet de la compatibilité des médicaments consommés, qui peuvent entrer au contact du préservatif. 6. Si un lubrifiant

supplémentaire est nécessaire, utiliser un lubrifiant à base d'eau, choisissez ceux qui sont recommandés pour l'utilisation du préservatif, mais jamais à base de pétrole, comme la vaseline, l'huile pour bébé, lotion pour le corps, huile de massage, beurre, margarine, etc. 7. Avant chaque rapport sexuel, dérouler le préservatif sur le pénis en érection, afin de vous protéger des maladies sexuellement transmissibles et du risque de grossesse. 8. Arrêtez-vous, si vous remarquez que le préservatif glisse ou dysfonctionne et vérifiez son état afin d'éviter tout risque de fissures. 9. Directement après l'éjaculation, retirez le pénis de l'orifice en saisissant le préservatif à sa base. 10. Si un préservatif présente des fissures lors de son utilisation, ou que des trosses apparaissent, veuillez consulter un avis médical au plus tard dans les 72h. 11. Ne jetez jamais de préservatifs usagés dans les toilettes, mais à la poubelle. 12. Ne pas utiliser à 2 reprises. Une réutilisation peut augmenter le risque d'infection ou de défaillance. 13. Les préservatifs normaux sont strictement réservés à l'usage vaginal. Pas pour le sexe anal. 14. Le latex de caoutchouc peut provoquer des réactions allergiques, notamment des chocs anaphylactiques. 15. Les préservatifs **LOOVARA** représentent une protection fiable, mais ne proposent ni une contraception, ni une protection à 100% contre le risque de grossesse, le SIDA et/ou les maladies infectieuses. 16. À l'usage du préservatif, il est recommandé de le garder dans un endroit frais et sec, sans exposition directe au soleil. Tenir à l'écart des enfants. Risque de suffocation dû à des préservatifs gonflés ou cassés. 17. L'utilisation de préservatifs pendant Les rapports sexuels oraux augmentent le risque de suffocation. 18. Un préservatif est un dispositif médical destiné aux profanes - hommes ou femmes adultes. 19. tous les sérieux Les incidents liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est résident. 20. Ces préservatifs sont conformes aux normes internationales ISO 4074/EN ISO 4074.

NL Extra informatie condoms:

1. Voor anticonceptie en preventie van seksueel overdraagbare infecties. 2. Voorzichtig hanteren en bij het uitpakken beschadigingen door vingernagels, sieraden enz. vermijden. 3. Gebruik het condom niet als het rubberen materiaal plakkerig of broos is of de individuele verpakking duidelijk is beschadigd. 4. Bij beschadiging een nieuw condom nemen en de andere weggoien. 5. Vraag aan een arts of apotheker of gebruikte medicamenten compatibel zijn met mogelijk contact met condoms. 6. Als extra smering nodig is, gebruik dan op water gebaseerde glijmiddelen, echter

noot op oliebasis zoals vaseline, babyolie, bodylotion, massageolie, boter, margarine enz. 7. Trek de condom voor elk seksueel contact over de penis in erectietoestand om zich te beschermen voor seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschap. 8. Stop wanneer u merkt dat de condom glijdt of spat en controleer hem op scheurgevaar. 9. Direct na de ejaculatie de penis terugtrekken en het condom vasthouden aan het begin van de penis. 10. Als een condom tijdens gebruik scheurt of als er een gaatje ontstaat, vraag dan zo snel mogelijk, ten laatste binnen de 72 uur, medische hulp. 11. Gooi gebruikte condoms niet in het toilet, maar bij het afval. 12. Niet 2x gebruiken, hergebruik kan de risico's op functieverlies of infecties verhogen. 13. Normale condoms zijn uitsluitend bedoeld voor vaginaal gebruik, niet voor anale seks. 14. NR-latex kan allergische reacties opwekken incl. anafylactische shock. 15. **LOOVARA** condoms zijn een betrouwbare bescherming, maar geen voorbehoeds-middel met 100% bescherming tegen zwangerschap, AIDS en/of infecties. 16. Bewaar de condoms op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Houd ze uit de buurt van kinderen. Kan gevaar voor verstikking veroorzaken door niet-opgeblazen of afgescheurde condom-fragmenten. 17. Condoomgebruik tijdens orale seks verhoogt het risico op asfyxie of stikken. 18. Een condom is een medisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt door leken - volwassen mannen of vrouwen. 19. Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd. 20. Deze condoms voldoen aan de internationale normen ISO 4074/EN ISO 4074.

IT Informazioni aggiuntive per preservativi:

1. Per la contraccezione e la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. 2. Maneggiare il preservativo con cura e al momento di estrarlo dalla confezione fare attenzione a non danneggiarlo con unghie, braccialetti, anelli, ecc. 3. Non usare il preservativo se il materiale in gomma è appiccicoso o fragile o il singolo contenitore presenta danni. 4. In caso di preservativo danneggiato, smaltirlo e utilizzarne un altro. 5. Consultare un medico o un farmacista per sapere se i medicinali utilizzati sono compatibili con il contatto con i preservativi. 6. Se è necessario lubrificante aggiuntivo, usare lubrificanti a base d'acqua o quelli consigliati con preservativi e non usare mai lubrificanti a base oleosa come vaselina, olio per bambini, lozioni per il corpo, olio per massaggi, burro, margarina, ecc. 7. Prima del contatto sessuale applicare il preservativo sul pene eretto al fine

di evitare il contagio di malattie sessuali trasmissibili e gravidanze non desiderate. 8. Se si nota che il preservativo scivola o è troppo aderente, fermarsi e controllarlo al fine di evitare il rischio di rottura. 9. Estrarre il pene subito dopo l'eiaculazione tenendo stretto il preservativo dall'inizio del pene. 10. Nel caso in cui il preservativo si laceri o si formi un buco durante l'utilizzo, consultare un medico il prima possibile, al massimo entro 72 ore. 11. Non gettare i preservativi usati nel water, bensì nella spazzatura. 12. Non riutilizzare il preservativo poiché ciò può limitare la sua efficacia e aumentare i rischi di infezione. 13. I preservativi normali sono destinati esclusivamente per uso vaginale, non per il sesso anale. 14. Il lattice di gomma naturale può provocare reazioni allergiche, inclusi shock anafilattici. 15. I preservativi **LOOVARA** rappresentano una protezione affidabile, tuttavia si tratta di un metodo contraccettivo che non offre una protezione al 100% contro gravidanza, AIDS e/o malattie infettive. 16. Conservare i preservativi in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole. Tenerli lontani da bambini. Può causare pericolo di soffocamento a causa di frammenti di preservativi non soffiati o strappati. 17. L'uso del preservativo durante il sesso orale aumenta il rischio di asfissia o soffocamento. 18. Il preservativo è un dispositivo medico che può essere usato da maschi adulti o femmine. 19. Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente si trova. 20. Questi preservativi sono conformi alle norme internazionali ISO 4074/EN ISO 4074.

DK Yderligere informationer om kondomer:

1. Prævention til forebyggelse af seksuelt overførte infektioner. 2. Skal behandles forsigtigt. Undgå at beskadige kondomet med fingernagel, smykker etc. ved udpakningen. 3. Brug ikke kondomer, hvis gummimaterialet er klisset eller skræblet, eller hvis den enkelte beholder er beskadiget. 4. Hvis kondomet beskadiges, skal du tage et nyt og smide det andet ud. 5. Spørg læge eller apoteker, om anvendte medicamenter er kompatible ved mulig kontakt med kondomet. 6. Hvis der kræves yderligere smøremiddel, brug vandbaserede eller anbefalede smøremidler med kondomer og brug aldrig smøremiddel oliebaseret såsom vaselin, olie til børn, bodylotion, body lotion, olie til massage, smør, margarine osv. 7. Træk kondomet over den erigerede penis før den seksuelle kontakt for at beskytte mod seksuelt overførte sygdomme og graviditet. 8. Stands straks, hvis du mærker, at kondomet glider af eller spænder og kontroller, at det ikke er ved at revne. 9. Træk penis tilbage straks efter


ejakulationen, og hold kondomet fast ved roden af penis. 10. Hvis kondomet revner under brug, eller der er hul i det, skal du kontakte lægen hurtigst muligt og senest inden for 72 timer. 11. Kast kondomer i skraldespanden, ikke i toiletet. 12. Må kun benyttes en gang, genbrug kan øge risikoen for svigt eller infektion. 13. Normale kondomer er beregnet kun til vaginal brug, ikke til analsex. 14. NR-latex kan fremkalde allergiske reaktioner inkl. anafylaktisk chok. 15. **LOOVARA** kondomer er pålidelig beskyttelse, men intet præventionsmiddel garanterer 100% beskyttelse mod svangerskab, AIDS og/eller infektions-sygdomme. 16. Opbevar på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys. Hold væk fra børn. Kan blive kvalt i oppustet kondom eller mangelfuld kondomfragment. 17. Brug af kondom ved oralsex øger risikoen til kvælning. 18. Et kondom er et medicinsk udstyr, der kan bruges af lægmand - voksne kvinder og mænd. 19. Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med produkt, skal rapportere til produktionen og den kompetente billedet i medlemslandet, hvor bruger og/eller patientbor. 20. Disse kondomer overholder de internationale standarder ISO 4074/EN ISO 4074.

SV Viktigt information om kondomer:

1. Används som preventivmedel samt som skydd mot könssjukdomar. 2. Se upp med vassa naglar, smycken och annat som kan skada kondomen, när förpackningen öppnas. 3. Använd inte kondomen om den känns klistrig eller skär, eller om förpackningen är skadad. 4. Om den kondom du använder går sönder, släng den och ta genast en ny. 5. Fråga läkare eller apotekspersonal om du kan använda kondom ifall du eller din partner samtidigt använder läkemedel för utvärts bruk. 6. Vid behov av extra glijmedel, använd vattenbaserade glijmedel. Använd aldrig barnolja, kroppslotion, massageolja eller något annat som innehåller olja eller fett. 7. För att förhindra graviditet och skydda dig själv och din partner mot sexuellt överförbara sjukdomar måste du sätta kondomen på din erigerade penis innan samlaget börjar. 8. Avbryt samlaget om du känner att kondomen sitter stramt eller glider av och kontrollera om den har gått sönder. 9. Dra tillbaka penis direkt efter utlösningen. Håll fast kondomen omkring penisroten medan du gör detta. 10. Om kondomen skulle gå sönder ska man så snart som möjligt och inom högst 72 timmar vända sig till läkare för att undvika eventuell graviditet. 11. Släng inte använda kondomer i toaletten utan i soporna. 12. Använd aldrig en kondom två gånger. Om man gör det ökar risken för infektioner och önskad graviditet. 13. Normala kondomer är endast



CONDOMS FOR YOUR SIZE

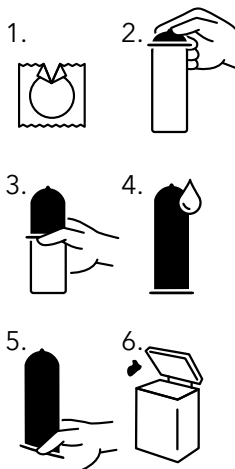

avsedda för vaginal användning, inte för analsex. 14. Natur-gummilatser kan utösa allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock. 15. Även om det saknas preventivmedel som kan garantera ett hundraprocentigt skydd mot graviditet, infektioner och aids, utgör **LOOVARA** kondomer ett tillförlitligt skydd. 16. Förvaras tätt och svalt, ej i direkt solljus. Förvaras ömtorkat för barn. En trasig eller inte upplåst kondom kan leda till kvävning. 17. Användning av kondom under oralsex ökar risken för kvävning. 18. Kondomer är en medicinsk enhet avsedd att användas av lekmän - vuxna män och kvinnor. 19. Alla allvarliga incidenter som uppstår i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och lämplig lokal myndighet. 20. Dessa kondomer överensstämmer med internationella standarderna ISO 4074/EN ISO 4074.

FI Lääsitietoja kondomeista:

1. Ehkäisyä ja sukupuoliiteitse tarttuvien infektioiden ehkäisy. 2. Käsittele varovasti ja vältä vaurioittamista kynsillä, koruilla tms. avatessasi pakkauksta. 3. Älä käytä kondomia, jos kumimateriaali on tahmeaa tai hauroista, tai jos yksittäinen pakkaus on selvästi vahingoittunut. 4. Jos kondomi vaurioituu, ota uusi ja hävitä rikottunut. 5. Neuvottele lääkärin tai apteekin kanssa, mikäli aiot käyttää kondomia lääkeroitoon tarkoitettujen aineiden kanssa. 6. Jos tarvitaan lisäsuojaksiteä, käytä vesipohjaisia liukuvoiteita. Käytä vain salasta, jota suositellaan kondomille. Älä koskaan käytä öljypohjaisia voiteita, kuten vaseliinia, vaahtovoijaa, vartalovoiteita, hierontavoijia, voita, margariinia jne. 7. Vedä kondomi ennen yhteyttä erektiosta olevan siittimen päälle suojaavaksi sukupuoliiteitse tartuttavilta taudeilta ja raskaudelta. 8. Lopeta, jos kuleksit kondomin repeävään tai kiristyvään, tai taukausta se repeytymisen varalta. 9. Ota siitin pois heti siemensyöksyn jälkeen ja pidä kiinni kondomin päästä. 10. Jos kondomi repeää tai siihen tulee reikä käytön aikana, ota yhteyttä terveydenhuoltoon mahdollisimman pian, vähintään 72 h kulussa. 11. Älä heitä käytettyjä kondomia WC-istuinten, vaan laita se roskakoriin. 12. Älä käytä toista kertaa. Uudelleenkäyttö voi nostaa virheellisen toiminnan tai infektioiden riskiä. 13. Normaali kondomit on tarkoitettu vain emättimiin, ei analiseksiksi varten. 14. NR-lateksi voi aiheuttaa allergisia reaktioita, mukaan luettuna anafylaktiset shokit. 15. **LOOVARA**-kondomit tarjoavat luotettavan suojan, mutta mikään ehkäisyväline ei suojaa 100-prosent-tiisesti raskaudelta, ÄläSilta/ta

tai infek-tiosairauksilta. 16. Säilytä viileässä ja kuivassa, älä altista suoralle auringonvalolle. Pidäpoissa lasten ulottuvilta. He voivat tukehtua käyttämättömiin kondomeihin tai niiden rikkoutuneisiin osiin. 17. Kondomin käyttö suuseksin aikana lisää tukehtumisriskiä. 18. Kondomi on maallikon, aikuisen miehen tai naisen, käyttöön tarkoitettu lääkinnällinen laite. 19. Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltioita toimittavaiselle viranomaiselle, johon käyttäjät jättäi potilas on sijoituttavissa. 20. Nämä kondomit ovat kansainvälisten standardien ISO 4074 / EN ISO 4074 mukaisia.

NO Ekstra opplysninger om kondomer:

1. For prevensjon og forebygging av seksuelt overførbarre infeksjoner. 2. Händer forsiktig og unngå skader gjennom negler, smykke osv. når de pakkes ut. 3. Bruk ikke kondomet hvis gummimaterialet er klissete eller skjørt, eller hvis beholderen er tydelig skadet. 4. Hvis et kondom skades, kast det, og bruk et nytt. 5. Spør en lege eller apteker, om medisn du tar er kompatibel med mulig kontakt med kondomer. 6. Hvis du trenger ekstra glid, bør du bruke vannbaserte glidemidler; Aldri bruk glidemiddel på oljebas, sånn som vaselin, babyolje, hudkrem, massasjoolje, smør, margarin e.l. 7. Trekk kondomet over den erigerte penisen for å beskytte mot seksuelt smittømt sykdommer og graviditet. 8. Avbryt samleiet hvis du legger merke til at kondomet er forskvett eller spennes, og sjekk det for revner. 9. Rett etter ejakulasjonen, trekk penisen tilbake, og hold fast kondomet på den bakre enden. 10. Hvis et kondom bryter under bruk eller det oppstår et hull i det, sak medisinsk hjelp senest innen 72 timer etter hendelsen. 11. Ikke kast brukte kondomer i WC, kast dem i søppelen. 12. Aldri bruk kondomer 2 ganger; dette vil øke risken for svikt eller infeksjon. 13. Normale kondomer er kun til vaginal bruk, ikke for analsex. 14. NR-lateks kan utløse allergiske reaksjoner inntil anafylaktisk sjokk. 15. **LOOVARA** kondomer beskytter pålitelig; desverre finnes det intet prevensjonsmiddel som byr 100% beskyttelse mot graviditet, AIDS og/eller infeksjonssykdomer. 16. Oppbevar på et kjølig og tørt sted beskyttet mot direkte sollys. Hold unna barn. Barn kan velles av sammenrullede eller ødelagte kondombitter. 17. Bruk av kondom under oralsex øker sjansen for kvælning. 18. Kondomer er medisinsk utstyr som kan brukes av legpersoner - voksne menn og kvinner. 19. Alle alvorlige hendelser i forbindelse med utstyret skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemsstaten som brukeren og/eller pasienten oppholder seg i. 20. Disse kondomene samsvarer med de internasjonale

standardene ISO 4074/EN ISO 4074.

CZ Kondomy - doplňkové informace:

1. Antikoncepcje a prevence pohlavně přenosných infekcí. 2. Při rozbalování zacházejte s kondomem opatrně, abyste předešli jeho poškození nehty či ostrými předměty. 3. Nepoužívejte kondom, pokud je gumový materiál lepkavý nebo krehlý nebo pokud je jeho samostatný obal zjevně poškozen. 4. Dojdete-li k poškození kondomu, vyhoďte jej a použijte jiný. 5. Informujte se u lékaře či lékárníka o vhodnosti případných užívajících léčiv, které by mohly přijít do kontaktu s kondomem. 6. Pokud je potřeba další lubrikace, použijte lubrikanty na vodní bázi. Vyhýnejte se použiti lubrikantu na olejové bázi jako například vaselína, dětský olej, tělové mléko, masáží olej, maslo, margarín a podobně. 7. Před každým sexuálním stykem přetřáhněte kondom přes ztopořevný penis, abyste předešli přenosu pohlavních chorob a nechtěnému těhotenství. 8. Ukončete styk a kondom zkontrolujte, pokud zpozorujete, že sklouzává nebo je příliš těsný. 9. Ihned po ejakulaci penis vytáhněte a kondom přitom držte pevně na kofeni penisu. 10. Pokud dojde k protřetíení nebo poškození kondomu, vyhleďte ihned, nejpozději však do 72 hodin od styku, lékařskou pomoc. 11. Použitý kondom nesplachujte do WC, ale vyhoďte jej do odpadu. 12. Kondom není určen k opakovanému použití, smíťovně použítí může zvýšovat riziko selhání ochrany nebo nškazy. 13. Normální kondomy jsou určeny pro vaginální použití, nikoli pro revner. 14. Kondomy z přírodního latexu mohou způsobit alergické reakce včetně anafylaktického šoku. 15. Kondomy **LOOVARA** poskytují spolehlivou ochranu, stoprocentní ochranu před nechtěným těhotenstvím, AIDS a/nebo dalšími pohlavními chorobami však neposkytují žádný antikoncepční prostředek. 16. Skládající na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozvínyť kondom, nebo jeho části při poškození mohou způsobit děvení nebo dušení. 17. Použití kondomu při orálním sexu zvyšuje riziko udušení. 18. Kondom je zdravotnický prostředek určený laickým osobám - dospělým nebo žene. 19. Jakkýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s přípravkem, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v kterém má uživatel nebo pacient sídlo. 20. Toto kondomy odpovídají mezinárodním normám ISO 4074/EN ISO 4074.

PLDodatkowe informacje o prezerwatywach:

1. Do antykoncepcji i zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą płciową. 2. Z prezerwatywy należy obchodzić się ostrożnie. Podczas rozpakowywania uważać, aby nie uszkodzić jej paznokciem, biżuterią itp. 3. Nie używaj

individual este dañado, descártelo y reemplázelo por uno nuevo. 5. Consulte con su médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de cualquier medicamento tóxico en contacto potencial con el condón. 6. Si necesita lubricación adicional, utilice lubricantes con base de agua. Nunca use productos grasos como vaselina, aceite o loción corporal, aceite para masajes, mantequilla, margarina, etc. 7. Coloque el condón en el pene erecto antes del contacto sexual entre el pene y el cuerpo de su pareja para prevenir ITS o embarazo. 8. Si siente que el condón se desliza o aprieta excesivamente el pene pare y revíselo por riesgo de ruptura. 9. Inmediatamente después de la eyaculación retire el condón de la vagina sosteniéndolo a la base del pene. 10. Si un condón se rompe o fuga durante el uso busque atención médica inmediata en por lo menos las próximas 72 horas. 11. Tire el condón usado a la basura, no al inodoro. 12. No lo use dos veces, reusar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección. 13. Los condones normales son solo para uso vaginal, no para sexo anal. 14. El látex puede causar una reacción alérgica, incluyendo choque anafiláctico. 15. Los condones **LOOVARA** son una protección confiable pero ningún método puede protegerle al 100% contra un embarazo, SIDA y/o enfermedades infecciosas. 16. Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o sofocar. 17. Utilizar preservativos durante el sexo oral aumenta el riesgo de asfixia y ahogos. 18. El condón es un dispositivo médico que puede ser utilizado por laicos - hombres y mujeres adultos. 19. Cualquier incidente grave que tenga lugar en relación con el producto debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que el usuario y/o el paciente está establecido. 20. Estos preservativos están en conformidad con la Normativa Internacional ISO 4074/ EN ISO 4074.

NR puede causar una reacción alérgica, incluyendo choque anafiláctico. 15. Los condones **LOOVARA** son una protección confiable pero ningún método puede protegerle al 100% contra un embarazo, SIDA y/o enfermedades infecciosas. 16. Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o sofocar. 17. Utilizar preservativos durante el sexo oral aumenta el riesgo de asfixia y ahogos. 18. El condón es un dispositivo médico que puede ser utilizado por laicos - hombres y mujeres adultos. 19. Cualquier incidente grave que tenga lugar en relación con el producto debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que el usuario y/o el paciente está establecido. 20. Estos preservativos están en conformidad con la Normativa Internacional ISO 4074/ EN ISO 4074.

PT Informações adicionais preservativos:

1. Para contracepção e prevenção de infeções sexualmente transmissíveis. 2. Manusear com cuidado e ao retirar da embalagem, evitar dados por unhas, jóias, etc. 3. Não use o preservativo caso esteja pegajoso ou frágil, ou se a embalagem individual estiver danificada. 4. Em caso de danos, utilizar outro preservativo e destruir o primeiro. 5. Consulte o seu farmacêutico, quanto à compatibilidade do contacto e uso de medicamentos com preservativos. 6. Se precisar de lubrificar mais a zona, use lubrificantes à base de água. Nunca

συντρόφου για την πρόληψη σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων ή εγκυμοσύνης. 8. Σταματήστε, εα ν παρατηρήσετε, οτι το προφυλακτικό γλιστράει ή σφίγγει και ελέγξτε το να δείτε μη πως εχει παρήσει. 9. Αμε σως μετα την εκπομπή τωσή τραβήξτε πι σω το πτεος κρατώντας το προφυλακτικό στην βάση του. 10. Εάν τω ή το προφυλακτικό κατα την χρήση ο το σκαστεί ή τρηπήσει, ζητήστε αν στομα, το αρμό το με σς σε 72 ωρες, ιατρική βοήθεια. 11. Μη πετάτε για τα χρησιμοποιούμενα προφυλακτικά στην τουαλέτα, μα στα σκουπίδια. 12. Μην τα χρησιμοποιείτε για δευτερή φορά, ή επαναχρησιμοποίηση μπορεί να αυξησει το ρίκο μη λειτουργήας η μοή λυνσης. 13. Τα κανονικά προφυλακτικά προορίζονται μόνο για κολική χρήση και όχι για πρωκτικό σεξ. 14. Το latex ή NR μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις με χρι και αναφυλακτικό σοκ. 15. Τα προφυλακτικά **LOOVARA** αποτελούν νω αμία πιστή προστασία, ο μως κανέ να αντισυλληπτικό, ος σον δεν μπορεί να παρείχει 100% προστασία, οτα εγκυμοσύνη, AIDS και μεταδοτικές σ αρρωστίες. 16. Φύλασσε το δροσερό και έρρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Κράτησέ το μακριά από παιδιά. Μπορεί να προκαλέσει νιγνιρό ή ασθμία σε μη φυσικωσμένα ή σπασμένα θωρακισμα προφυλακτικού. 17. Η χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια του στοματικού σεξ αυξάνει τον κίνδυνο αναφύλαξης ή νιγνιρό. 18. Το προφυλακτικό είναι ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται από ενήλικες άδερους ή γυναικώς. 19. Κάθε σκουπίσ συμμόν που έχει συμπίει σε σχέση με την συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο ο χρήστης ή / και ο ασθενης. 20. Αυτά τα προφυλακτικά συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ISO 4074 / EN ISO 4074.

TR Kondomlarla ilgili ek bilgiler:

1. Gebelik önlemek ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için. 2. Dikkatli kullanın ve ürünü ambalajdan çıkarkten trnak, takı vb. etkenlerden uzak görmesini öyleyin. 3. Kaucuk malzeme yapışkan veya kirliğansa veya tek tek kap açık bir şekilde hasar görmüşse kondomu kullanmayın. 4. Zarar görüldüğünde yeni kondom alın ve diğeriati atın. 5. Ezcazi veya hekiminize, alimnakta olan ilaçların kondomlarla olası temas durumunda uyumlu olup olmadığını sorun. 6. Ekstra yağlama gerekiyorsa, su bazlı yağlıayıcılar kullanın. Ancak alsa gibi yağlı bazlı bir madde kullanmayın vazelin, bebek yağı, masaj yağı, tereyağı, margarin vs. 7. Cinsel iliski ile bulascisi hastalıklardan ve hamilelikten korunmak için kondomu her cinsel temas öncesinde erekte olan penisin üzerine geçiririn. 8. Kondomun kaydırilini veya gerildiğini fark ettiğiniz takdirde durun ve yirtılma tehlikesi açısından kontrol edin. 9. Ejakülsiyondan hemen sonra penisin geri çekin ve kondomu penisin başlangıcın kismından

Distribution/Vertrieb:
LOOVARA Intimate GmbH,
Rahel-Hirsch-Str. 10, 10557 Berlin.
Mail: condoms@loovara.com
Web: www.loovara.com