

Wir möchten Ihnen die beste Produkterfahrung bieten



alpineearcare.com

Scannen Sie den Code, um zum Anleitungsvideo, den FAQ oder zur Kontaktaufnahme zu gelangen. Wir sind Ihnen gerne behilflich.

East Midlands Pharma Ltd, Unit 1 Rothley Lodge,
Loughborough Road, Rothley, Leicestershire, LE7 7NL

EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

Text am 08/2024 überarbeitet

Version 024-02



EN

Earwax or cerumen is a yellowish-brown wax-like substance produced by glands in the ear canal to help lubricate, protect, and clean the ear canal. Normally the wax and any trapped particles will move along the ear, to the opening of the ear where it is expelled. For some people this wax can build up which can lead to partial hearing loss or ear pain.

Earwax Removal drops contain glycerol to gently soften the wax, and urea peroxide, which releases oxygen to break up the hardened earwax deposits.

Ingredients

Glycerol BP, Urea Hydrogen Peroxide 5%

Do not use Earcare Removal drops if:

- Your ear drum has been damaged or perforated, you have an infection or any problems with your ears (eczema, itching sensation, dermatitis and any other local cutaneous (skin) problem).
- You are sensitive to any ingredients listed above.

Do not use this product after the expiry date printed on the carton and label.

Use within 30 days of first opening.

Warnings

- Children should receive medical diagnosis before using these drops to confirm earwax is present.
- Earcare removal drops should only be used in the ear.
- Avoid contact with the eyes, in case of accidental contact, rinse thoroughly with clean water and consult a doctor.
- Do not use if ear drum has been damaged or perforated, if there is an infection or any problems with ears (eczema, itching sensation, dermatitis or any other local cutaneous (skin) problem).
- Do not swallow.
- Do not use if you are sensitive to any of the ingredients.
- Do not use at the same time as any other ear drop preparations.
- Do not insert hearing aids immediately after use but allow at least 15 minutes for any residue to be removed.
- Do not use if seal on the bottle is broken before first use.
- Keep out of the sight and reach of children.
- For external use only.



Do not store above 25°C

DE

Ohrenschmalz oder Cerumen ist eine gelblich-braune wachsartige Substanz, die von Drüsen im Gehörgang produziert wird, um den Gehörgang zu schmieren, zu schützen und zu reinigen. Normalerweise bewegen sich das Wachs und die darin eingeschlossenen Partikel entlang des Ohrs bis zur Öffnung des Ohrs, wo es ausgestoßen wird. Bei manchen Menschen kann sich dieses Ohrenschmalz ansammeln, was zu teilweisem Hörverlust oder Ohrenschmerzen führen kann.

Die Tropfen zur Entfernung von Ohrenschmalz enthalten Glycerin, das das Ohrenschmalz sanft aufweicht, und Harnstoff-Wasserstoffperoxid, das Sauerstoff freisetzt, um das verhärtete Ohrenschmalz aufzulösen.

Wirkstoffe

Glycerin BP, Harnstoff-Wasserstoffperoxid 5%

Verwenden Sie Ohrenschmalz Entferner Tropfen nicht, wenn:

- Ihr Trommelfell beschädigt oder perforiert ist, Sie eine Infektion oder Probleme mit Ihren Ohren haben (Ekzeme, Juckreiz, Dermatitis und andere lokale Hautprobleme).
- Sie empfindlich auf einen der oben genannten Wirkstoffe reagieren.

Nicht nach Ablauf des auf dem Karton und dem Etikett angegebenen Verfallsdatums verwenden.

Innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Öffnen aufbrauchen, sonst den Inhalt entsorgen.

Warnhinweise

- Vor der Anwendung dieser Tropfen bei Kindern sollte eine ärztliche Beurteilung eingeholt werden, um sicherzustellen, dass Ohrenschmalz vorhanden ist.
- Ohrenschmalz Entferner Tropfen zur Entfernung von Ohrenschmalz sollten nur im Ohr verwendet werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen, spülen Sie sie bei versehentlichem Kontakt gründlich mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Nicht anwenden bei beschädigtem oder perforiertem Trommelfell, bei einer Infektion oder Problemen mit den Ohren (Ekzem, Juckreiz, Dermatitis oder andere lokale Hautprobleme).
- Nicht schlucken.
- Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Wirkstoffe empfindlich reagieren.
- Nicht gleichzeitig mit anderen Ohrentropfen anwenden.
- Setzen Sie Hörgeräte nicht sofort nach der Anwendung ein, sondern warten Sie mindestens 15 Minuten, bis alle Rückstände entfernt sind.
- Nicht verwenden, wenn das Flaschensiegel vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist.
- Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.



Nicht über 25°C lagern





ALPINE
HEARING PROTECTION

OHRENSCHMALZ
ENTFERNER TROPFEN

PACKUNGSBEILAGE

Vegan

20ml e

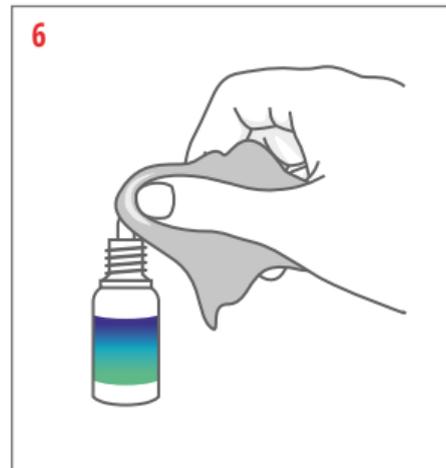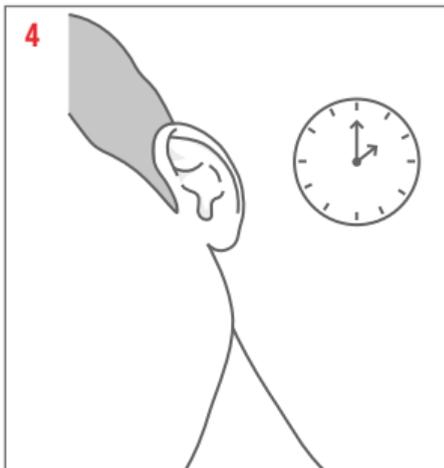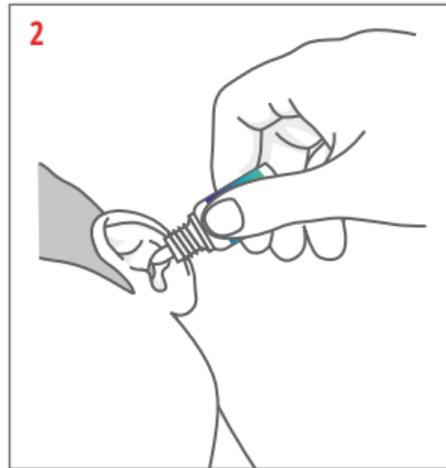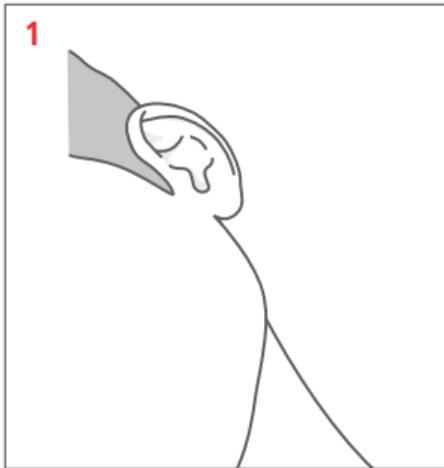

EN

Directions of use

You should follow the instructions to ensure removal of wax.

Check that the nozzle and bottle are not damaged or broken before use.

1. Tilt the head to one side with the affected ear facing upwards.
 2. Avoid touching the ear with the nozzle and do not put nozzle into the ear canal.
 3. Drop 3 to 6 drops into the ear and gently massage around the outside of the ear.
 4. Keep the drops in the ear for a few minutes.
 5. Then rinse with lukewarm water, to remove the remaining earwax.
 6. Gently wipe the nozzle with clean cotton wool after use.
- Repeat with other ear if required.
 - Use once or twice a day, for up to 6 days if necessary.
 - As the earwax begins to soften, before it is removed, it can begin to swell slightly, which might give a feeling of fullness in the ear, temporarily affect hearing, and occasionally, can cause slight dizziness or affect balance. A temporary bubbling sensation may occur. Should these symptoms persist or worsen, or if you experience any other side effects or burning, stop using Earcare Removal drops and seek advice from your doctor or pharmacist.

DE

Gebrauchsanweisung

Sie sollten die Anweisungen befolgen, um sicherzustellen, dass das Ohrenschmalz entfernt wird.

Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass die Düse und die Flasche nicht beschädigt oder zerbrochen ist.

1. Neigen Sie den Kopf zur Seite, so dass das betroffene Ohr nach oben zeigt.
 2. Vermeiden Sie es, das Ohr mit der Düse zu berühren, und stecken Sie die Düse nicht in den Gehörgang.
 3. Geben Sie 3 bis 6 Tropfen in das Ohr und massieren Sie die Außenseite des Ohrs sanft.
 4. Lassen Sie die Tropfen ein paar Minuten im Ohr.
 5. Dann mit lauwarmem Wasser ausspülen, um das restliche Ohrenschmalz zu entfernen.
 6. Nach der Anwendung die Düse sanft mit sauberer Watte abwischen.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf am anderen Ohr.
 - Verwenden Sie die Tropfen ein- oder zweimal täglich, bei Bedarf bis zu 6 Tage lang.
 - Wenn das Ohrenschmalz anfängt aufzuweichen, bevor es entfernt wird, kann es leicht anschwellen, was zu einem Gefühl der Enge im Ohr, einer vorübergehenden Beeinträchtigung des Hörvermögens und gelegentlich zu leichtem Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen führen kann. Es kann ein vorübergehendes Blubbergeräusch auftreten. Wenn diese Symptome anhalten oder sich verschlimmern, oder wenn Sie andere Nebenwirkungen oder Brennen bemerken, beenden Sie die Anwendung von Ohrenschmalz Entferner Tropfen und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.