





TĚHOTENSKÝ TEST

rychlý
snadný
spolehlivý

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevila koupí těhotenského testu Sluníčko Healthies. Prosíme, přečtěte si pozorně návod k použití

Účel použití

Sluníčko Healthies Těhotenský test je rychlý těhotenský test, který můžete provádět Vy sama. Na základě kvalitativní chromatografické imunoanalýzy zjišťuje přítomnost lidského choriového gonadotropinu (hCG), který se objevuje v moči již ve velmi časném období těhotenství.

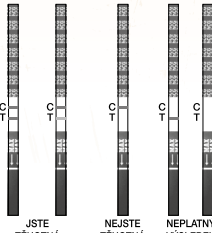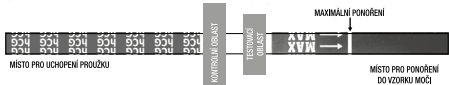

C = kontrolní oblast
T = testovací oblast

Shrnutí

Lidský choriový gonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon, který vytváří vyvíjející se placentu již krátce po oplodnění. Při normálním těhotenství můžeme zachytit hCG v moči i v krevním séru nebo plasmě již 7 až 10 dní po početí.^{1, 2, 3, 4} Hladina hCG velmi rychle roste. Často přesáhne 100 mIU/ml první den očekávané pravidelné menstruace^{2, 3, 4} a vrcholí v rozmezí 100 000–200 000 mIU/ml mezi 10.–12. týdnem těhotenství. Tím, že se hCG objevuje jak v moči, tak i v krevním séru nebo plasmě krátce po početí a jeho koncentrace během časného růstu zárodečných tkání rychle stoupá, stává se jeho přítomnost vynikajícím ukazatelem pro časné zjištění těhotenství. Sluníčko Healthies Těhotenský test je rychlý test, který kvalitativně zjišťuje přítomnost hCG ve vzorku moči. Test používá kombinaci monoklonálních a polyklonálních protilátek, díky které selektivně zachytí zvýšenou hladinu hCG. Citlivost testu je 10 mIU/ml. Na úrovni uváděné citlivosti Sluníčko Healthies Těhotenský test nevykazuje nežádoucí zkřížené reakce se strukturálně podobnými glykoproteinovými hormony hFSH, hLH a hTSH ve vysokých fyziologických hodnotách.

Princip

Sluníčko Healthies Těhotenský test je jednorokový test, který pracuje na principu laterální protokové imunoanalýzy ve formátu ke kvalitativnímu zjištění hCG v moči, čímž napomáhá zjištění těhotenství. K selektivnímu zachycení zvýšené hladiny hCG využívá kombinaci monoklonálních a polyklonálních protilátek. Testování se provádí ze vzorku moči. Výsledkem jsou zřetelné barevné čáry.

Sběr a příprava vzorku moči

Vzorek moči odeberte do čisté a suché nádoby. Nejvhodnější je první ranní moč, neboť zpravidla obsahuje nejvyšší koncentraci hCG. Lze však použít i moč získanou kdykoliv během dne. Pokud je vzorek moči zakalený (obsahuje sraženiny), počkejte, až se zákal usadí a vzorek se vyčistí. Případně je možné zákal před testováním odstranit centrifugací a filtrací.

Uchovávání vzorku

Pokud vzorek moči nepoužijete k testování ihned po odběru, můžete ho uchovávat až 48 hodin při teplotě 2–8 °C. Dlouhodobě lze vzorky skladovat zmrazení při teplotě –20 °C. Zmrazené vzorky nechte před použitím roztát a poté je promícháte.

Upozornění

Před použitím testu si prosím přečtěte tento návod.

- Nepoužívejte pro uplynutí doby použitelnosti, kterou najdete na obalu.
- Neskladujte na suchém místě při 2–30 °C. Nezmrázte.
- Nepoužívejte, pokud je ochranný sáček roztržený nebo poškozený.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Pouze pro použití k diagnostice v nádobce se vzorkem moči (in vitro). Nepoužívejte vnitřně!
- Sáček otvóřte až těsně před použitím.
- Použitý test zlikvidujte spolu s domácím odpadem. Testovací sada se smí použít pouze jednou.

Obsah balení

- 2 sáčky obsahující po jednom testovacím proužku a vysoušedlo. Vysoušedlo slouží pouze pro účely skladování, pro vlastní testování se nepoužívá.
- Příbalová leták s návodem k použití.


Co ještě potřebujete?

- Čistou a suchou nádobku, do které odeberete moč.
- Časoměr (hodiny nebo hodinky).

Tyto potřeby nejsou součástí testovací sady.

Provedení testu

- Vymočte se do čisté a suché nádoby.
- Před otevřením sáčku uchovávejte test při pokojové teplotě. Vymějte testovací proužek ze sáčku a použijte ho do jedné hodiny po otevření.
- Ponořte proužek ve směru šipky do vzorku moči. Důležité: Neponořujte proužek nad vyznačenou linii maximálního ponoření, jinak test neproběhne správně!
- Začněte měřit čas. Po 15 sekundách můžete proužek vyjmout ze vzorku nebo ho můžete ve vzorku ponechat.
- Po třech minutách můžete test odečíst. Neodečítejte po uplynutí 10 minut.

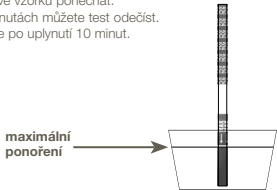

Odečtení výsledků

Positivní výsledek (jste těhotná):

V kontrolní (C) i testovací (T) oblasti se objeví dva zřetelné barevné proužky. Intenzita zbarvení proužků může být různá. Jeden proužek může být světlejší než druhý. Znamená to, že pravděpodobně jste těhotná.

Literatura

- Báizer FR. Hormonal evaluation of early pregnancy. Fertil. Steril. 1980; 34(1): 1–13
- Catt KJ, ML Dufau, J. Vaitukaitis Appearance of hCG in pregnancy plasma following the initiation of implantation of the blastocyste. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1975; 40(3): 537–540
- Braunstein GD, J. Rasm, H. Danzer, D. Adler, ME Wade Serum human chorionic gonadotropin levels throughout normal pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 1976; 126(6):678–681
- Lenton EA, LM Laidman, R. Sulaiman Plasma concentration of human chorionic gonadotropin from the time of implantation until the second week of pregnancy. Fertil. Steril. 1982;37(6): 773–778
- Steier JA, P. Bergsjo, LO Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy. Obstet. Gynecol.1984; 64(3): 391–394
- Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and chorionicarcoma. Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172–181
- Braunstein GD, J. Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production

Negativní výsledek (nejste těhotná):

Objeví se pouze jeden barevný proužek, a to v kontrolní oblasti (C). Není patrný žádný barevný proužek v testovací oblasti (T). To znamená, že těhotenství nebylo testem potvrzeno.

Neplatný výsledek:

Pokud nebyl test proveden správným způsobem, neobjeví se žádný barevný proužek nebo se objeví pouze proužek v testovací oblasti (T), nikoliv však v kontrolní oblasti. Zopakujte test s novou sadou. Pokud je výsledek testu opakovaně neplatný, kontaktujte prosím výrobce nebo prodejce. Nezapomeňte uvést číslo šarže.

Omezení

- Sluníčko Healthies Těhotenský test je předběžný kvalitativní test. To znamená, že nelze kvantitativně stanovit koncentrace hCG ani zjistit rychlost jejich vzestupu.
- Velmi zředěné vzorky, vyznačující se nízkou specifickou váhou, nemusí obsahovat reprezentativní množství hCG k zobrazení pozitivního výsledku. Pokud přesto předpokládáte, že jste těhotná, zopakujte test s první ranní močí po uplynutí nejméně 48 hodin od posledního testování.
- Velmi nízké hladiny hCG (méně než 50 mIU/ml) je možné zachytit již krátce po zahlnění embrya v děloze. Protože však poměrně významný počet těhotenství přirozeně končí během prvního trimestru,⁵ měl by být výsledek, který se jeví jako slabě pozitivní, potvrzen novým testem, provedeným s první ranní močí po uplynutí nejméně 48 hodin od posledního testování.
- Test může za určitých okolností ukázat falešně pozitivní výsledek. Zvýšené hladiny hCG kromě těhotenství také způsobuje celá řada onemocnění, jako například trofoblastické onemocnění a některé netrofoblastické novotvary včetně nádorů varlat, prostaty, prsu a plic.^{6, 7} Proto by přítomnost hCG neměla být samostatně používána k diagnostice těhotenství bez současného vyloučení uvedených onemocnění.
- Test může za určitých okolností ukázat falešně negativní výsledek. To se může stát, pokud je příliš nízká hladina hCG, tedy pod hranici uvedené citlivosti. Pokud přesto předpokládáte, že jste těhotná, zopakujte test s první ranní močí po uplynutí nejméně 48 hodin od posledního testování. Pokud i přesto dostáváte negativní výsledek, navštivte lékaře, který provede podrobnější vyšetření.
- Tento test poskytuje předběžnou diagnózu těhotenství. Vaše těhotenství může definitivně potvrdit pouze lékař na základě dalších vyšetření.

Otázky a odpovědi

- Jak tento test funguje?** Sluníčko Healthies Těhotenský test zjišťuje přítomnost hormonu hCG v moči. Tento hormon Vaše tělo vylučuje během těhotenství a jeho množství postupně vzrůstá.
- Kdy mohu provádět test, pokud předpokládám, že jsem těhotná?** Můžete použít svůj moč již první den vymečání pravidelné menstruace. Test můžete provádět kdykoliv během dne. Nejvhodnější však je první ranní moč, která obsahuje – jste-li těhotná – nejvíce těhotenského hormonu.
- Musím testovat první ranní moč?** Můžete testovat kdykoliv během dne, avšak první ranní moč obvykle obsahuje nejvíce hCG, a proto je nejvhodnější.
- Jak je tento test přesný?** Při klinickém ověřování byly výsledky tímto testem porovnávány s jiným komerčně dostupným těhotenským testem. Spotřebitelská klinická studie zahrnovala 413 vzorků moči: oba výrobky ukázaly 117 pozitivních a 117 negativních výsledků. Výsledek ukázal více než 99% přesnost ve srovnání s jiným membránovým testem.
- Jaká je citlivost tohoto testu?** Sluníčko Healthies Těhotenský test zachytí hCG v moči při koncentraci 10 mIU/ml a vyšší. Test je standardizován podle mezinárodního standardu WHO (Světová zdravotnická organizace). Přídavek LH (300 mIU/ml), FSH (1000 mIU/ml) a TSH (1000 µIU/ml) k negativnímu (0 mIU/ml hCG) a pozitivnímu (10 mIU/ml hCG) vzorku neprokázal zkříženou reaktivitu.
- Co mám dělat, pokud test ukazuje, že jsem těhotná?** Znamená to, že Vaše moč obsahuje hCG, a tedy pravděpodobně jste těhotná. Navštivte svého lékaře, který těhotenství potvrdí provedením dalších vyšetření a předá Vám rady, jak vhodně upravit svoji životosprávu.
- Jak poznám, že test proběhl správně?** Proužek, který se objeví v kontrolní oblasti (C), potvrzuje, že jste postupovala dle návodu správně a test absorboval dostatečné množství moči.
- Co mám dělat, pokud test ukazuje, že nejsem těhotná?** Znamená to, že test nezjistil přítomnost hCG ve vaší moči. Pravděpodobně tedy nejste těhotná. Pokud se Vaše pravidelná menstruace opozdila o více než týden, zopakujte test s novým proužkem. Pokud i přesto dostáváte stejný výsledek a menstruace se stále nedostavila, navštivte lékaře.

IVD	Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro		Čtěte návod pro použití
2°C — 30°C	Uchovávejte při teplotě 2–30 °C		Nepoužívejte opakovaně
LOT	Číslo šarže		Datum použitelnosti
EC REP	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství		Počet testů v sadě
	Nepoužívejte, je-li obal poškozený	REF	Katalogové číslo

Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd., 17th Fatai Road, Zhongtai Street, Yuhang District, 311121 Hangzhou, Zhejiang, China

EC REP Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Distributor: Apotis, s. r. o., Tomiškova 2144/1, 148 00 Praha 4, Česko



CE 0123

Aktualizace: 07/2022



TEHOTENSKÝ TEST

rýchly
jednoduchý
spolehlivý

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tehotenského testu Sluníčko Healthies. Prosíme, pozorne si prečítajte návod na použitie

Účel použitia

Sluníčko Healthies Tehotenský test je rýchly tehotenský test, ktorý môžete vykonať Vy sama. Na základe kvalitatívnej chromatografickej imunoanalýzy zisťuje prítomnosť ľudského choriového gonadotropínu (hCG), ktorý sa objavuje v moči už vo veľmi včasnom období tehotenstva.



Zhrnutie

Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón, ktorý vytvára vyvíjajúca sa placenta už krátko po oplodnení. Pri normálnom tehotenstve môžeme zachytiť hCG v moči aj v krvnom sére alebo plazme už 7 až 10 dní po počatí.^{1,2,3,4} Hladina hCG veľmi rýchlo rastie. Často presiahne 100 mIU/ml prvý deň očakávanej pravidelnej menštruácie^{2,3,4} a vrcholí v rozmedzí 100 000–200 000 mIU/ml medzi 10.–12. týždňom tehotenstva. Tým, že sa hCG objavuje ako v moči, tak aj v krvnom sére alebo plazme krátko po počatí a jeho koncentrácia počas včasného rastu zárodočných tkanív rýchlo stúpa, stáva sa jeho prítomnosť vynikajúcim ukazovateľom pre včasné zistenie tehotenstva. Sluníčko Healthies Tehotenský test je rýchly test, ktorý kvalitatívne zisťuje prítomnosť hCG vo vzorke moču. Test používa kombináciu monoklonálnych a polyklonálnych protilátok, vďaka ktorej selektívne zachytí zvýšenú hladinu hCG. Citlivosť testu je 10 mIU/ml. Na úrovni uvádzanej citlivosti Sluníčko Healthies Tehotenský test nevykazuje nežiaduce skrížené reakcie so štruktúrne podobnými glykoproteínovými hormónmi hFSH, hLH a hTSH vo vysokých fyziologických hodnotách.

Princíp

Vzorku moču odoberate do čistej a suchej nádoby. Najvhodnejší je prvý ranný moč, pretože spravidla obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG. Možno však použiť aj moč získaný kedykoľvek počas dňa. Pokiaľ je vzorka moču zakalená (obsahuje zrazeniny), počkajte, až sa zkalí usadí a vzorka sa odkalí. Prípadne je možné zkalenú vzorku pred testovaním odstrániť centrifugáciou a filtráciou.

Zber a príprava vzorky moču

Vzorku moču odoberate do čistej a suchej nádoby. Najvhodnejší je prvý ranný moč, pretože spravidla obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG. Možno však použiť aj moč získaný kedykoľvek počas dňa. Pokiaľ je vzorka moču zakalená (obsahuje zrazeniny), počkajte, až sa zkalí usadí a vzorka sa odkalí. Prípadne je možné zkalenú vzorku pred testovaním odstrániť centrifugáciou a filtráciou.

Uchovávanie vzorky

Pokiaľ vzorku moču nepoužijete na testovanie ihneď po odbere, môžete ju uchovávať až 48 hodín pri teplote 2–8 °C. Dlhodobé je možné vzorky skladovať zmrazené pri teplote –20 °C. Zmrazené vzorky nechajte pred použitím roztopiť a potom ich premiešať.

Upozornenie

Prosíme, pred použitím testu si prečítajte tento návod.

- Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti, ktorú nájdete na obale.
- Skladujte na suchom mieste pri teplote 2–30 °C. Nezmrazujte.
- Nepoužívajte, pokiaľ je ochranné vrecúško roztrhnuté alebo poškodené.
- Skladujte mimo dosahu detí.
- Iba pre použitie k diagnostike v nádobke so vzorkou moču (in vitro). Nepoužívajte vnútorne!
- Vrecúško otvárajte až tesne pred použitím.
- Použitý test zlikvidujte spolu s domácom odpadom. Testovací set sa smie použiť iba jedenkrát.

Obsah balenia

- 2 vrecúška obsahujúce po jednom testovacom prúžku a vysúšadlo. Vysúšadlo slúži iba pre účely skladovania, pre vlastné testovanie sa nepoužíva.
- Príbalový leták s návodom na použitie.


Čo budete ešte potrebovať?

- Čistú a suchú nádoby, do ktorej odoberiete moč.
- Časovač (hodinky).

Tieto potreby nie sú súčasťou testovacieho setu.

Vykvanie testu

- Vymočte sa do čistej a suchej nádoby.
- Pred otvorením vrecúška uchováajte test pri izbovej teplote. Vytiahnite testovací prúžok z vrecúška a použite ho do jednej hodiny po otvorení.
- Ponorte prúžok v smere šípky do vzorky moču. Dôležité: Neponárajte prúžok nad vyznačenú líniu maximálneho ponorenia, inak test neprebehne správne!
- Začnite merať čas. Po 15 sekundách môžete prúžok vytiahnuť zo vzorky alebo ho môžete vo vzorke ponechať.
- Po troch minútach môžete výsledky testu odčítať. Neodčítajte po uplynutí 10 minút.

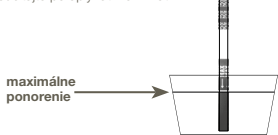

Odčítanie výsledkov

Positívny výsledok (ste tehotná):

V kontrolnej (C) aj testovacej (T) oblasti sa objavili dva zreteľné farebné prúžky. Intenzita zafarbenia prúžkov môže byť rôzna. Jeden prúžok môže byť svetlejší ako druhý. Znamená to, že pravdepodobne ste tehotná.

Literatúra

- Batzer FR. Hormonal evaluation of early pregnancy. Fertil. Steril. 1980; 34(1): 1–13
- Catt KJ, ML Dufau, J. Vaitukaitis Appearance of hCG in pregnancy plasma following the initiation of implantation of the blastocyste. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1975; 40(3): 537–540
- Braunstein GD, J. Reasor, H. Danzer, D. Adler, ME Wade Serum human chorionic gonadotropin levels throughout normal pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 1976; 126(6):678–681
- Lenton EA, LM Neall, R Sulaiman Plasma concentration of human chorionic gonadotropin from the time of implantation until the second week of pregnancy. Fertil. Steril. 1982;37(6): 773–778
- Steier JA, P. Bergamo, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy. Obstet. Gynecol.1984; 64(3): 391–394
- Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and chorionicarcoma. Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172–181
- Braunstein GD, J. Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production

Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd., 17th Futai Road, Zhongtai Street, Yuhang District, 31121 Hangzhou, Zhejiang, China

EC REP Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Distribútor: Apotis, s. r. o., Tomiškova 2144/1, 148 00 Praha 4, Česko



CE 0123

Aktualizácia: 07/2022

Negatívny výsledok (nie ste tehotná):

Objavil sa iba jeden farebný prúžok a to v kontrolnej oblasti (C). Nie je jasný žiadny farebný prúžok v testovacej oblasti (T). To znamená, že tehotenstvo nebolo testom potvrdené.

Neplatný výsledok:

Pokiaľ nebol test vykonaný správnym spôsobom, neobjavil sa žiadny farebný prúžok alebo sa objavil iba prúžok v testovacej oblasti, nie však v kontrolnej oblasti. Zopakujte test s novým testom. Pokiaľ je výsledok testu opakovane neplatný, kontaktujte, prosím, výrobcu alebo predajcu. Nezabudnite uviesť číslo šarže.

Obmedzenia

- Sluníčko Healthies Tehotenský test je predbežný kvalitatívny test. To znamená, že nejde kvantitatívne stanoviť koncentráciu hCG ani zistiť rýchlosť jej vzostupu.
- Veľmi zriedené vzorky, vyznačujúce sa nízkou špecifickou váhou, nemusia obsahovať reprezentatívne množstvo hCG pre zobrazenie pozitívneho výsledku. Pokiaľ napriek tomu predpokladáte, že ste tehotná, zopakujte test s prvým ranným močom po uplynutí najmenej 48 hodín od posledného testovania.
- Veľmi nízke hladiny hCG (menej ako 50 mIU/ml) je možné zachytiť už krátko po zahmlení embrya v maternici. Pretože však pomerne významný počet tehotenstiev prirodzene končí počas prvého trimestra,⁵ mal by byť výsledok, ktorý sa javí ako slabý pozitívny, potvrdený novým testom, vykonaným s prvým ranným močom po uplynutí najmenej 48 hodín od posledného testovania.
- Test môže za určitých okolností ukázať falošne pozitívny výsledok. Zvýšené hladiny hCG okrem tehotenstva tiež zapríčinja celý rad ochorení, ako napríklad trofoblastické ochorenia a niektoré netrofoblastické novotvary vrátane nádoru semenníkov, prostaty, prís a pľúc.^{6,7} Preto by prítomnosť hCG nemala byť samostatne používaná k diagnostike tehotenstva bez súčasného vylúčenia uvedených ochorení.
- Test môže za určitých okolností ukázať falošne negatívny výsledok. To sa môže stať, pokiaľ je príliš nízka hladina hCG, teda pod hranicu uvedenej citlivosti. Pokiaľ napriek tomu predpokladáte, že ste tehotná, zopakujte test s prvým ranným močom po uplynutí najmenej 48 hodín od posledného testovania. Pokiaľ aj tak dostávate negatívny výsledok, navštívte lekára, ktorý vykoná podrobnejšie vyšetrenie.
- Tento test poskytuje predbežnú diagnózu tehotenstva. Vaše tehotenstvo môže definitívne potvrdiť iba lekár na základe ďalších vyšetrení.

Otázky a odpovede

- Ako tento test funguje?** Sluníčko Healthies Tehotenský test zisťuje prítomnosť hormónu hCG v moči. Tento hormón Vaše telo vylučuje počas tehotenstva a jeho množstvo postupne vzrastá.
- Kedy môžeme vykonávať test, pokiaľ predpokladám, že som tehotná?** Môžete použiť svoj moč už prvý deň vynechanj pravidelnej menštruácie. Test môžete vykonávať kedykoľvek počas dňa. Najvhodnejší však je prvý ranný moč, ktorý v prípade, ak ste tehotná, obsahuje najviac tehotenského hormónu.
- Musím testovať prvý ranný moč?** Môžete testovať kedykoľvek počas dňa, avšak prvý ranný moč obvykle obsahuje najviac hCG a preto je najvhodnejší.
- Aká je presnosť tohto testu?** Pri klinickom overovaní boli výsledky týmto testom porovnávané s iným komerčne dostupným tehotenským testom. Spotrebiteľská klinická štúdia zahŕňala 413 vzoriek moču: oba výrobky ukázali 117 pozitívnych a 117 negatívnych výsledkov. Výsledok ukázal viac ako 99% presnosť v porovnaní s iným membránovým testom.
- Aká je citlivosť tohto testu?** Sluníčko Healthies Tehotenský test zachytí hCG v moči pri koncentracii 10 mIU/ml a vyššej. Test je štandardizovaný podľa medzinárodného štandardu WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Prídavok LH (300 mIU/ml), FSH (1000 mIU/ml) a TSH (1000 µIU/ml) k negatívnej (0 mIU/ml hCG) a pozitívnej (10 mIU/ml hCG) vzorke nepreukázal skríženú reaktivitu.
- Čo mám robiť, pokiaľ test ukazuje, že som tehotná?** Znamená to, že Váš moč obsahuje hCG, a teda pravdepodobne ste tehotná. Navštívte svojho lekára, ktorý tehotenstvo potvrdí vykonaním ďalších vyšetrení a odovzdá Vám rady, ako vhodne upraviť svoju životosprávu.
- Ako spoznáť, že test prebehol správne?** Prúžok, ktorý sa objavil v kontrolnej oblasti (C), potvrdzuje, že ste postupovali podľa návodu správne a test absorboval dostatočné množstvo moču.
- Čo mám robiť, pokiaľ test ukazuje, že nie som tehotná?** Znamená to, že test nezistil prítomnosť hCG vo vašom moči. Pravdepodobne teda nie ste tehotná. Pokiaľ Váša pravidelná menštruácia mešká o viac ako týždeň, zopakujte test s novým prúžkom. Ak napriek tomu dostávate rovnaký výsledok a menštruácia sa stále nedostavila, navštívte lekára.

IVD	Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro		Čítajte návod na použitie
2°C 30°C	Uchovávať pri teplote 2–30 °C		Nepoužívajte opakovane
LOT	Číslo šarže		Dátum použiteľnosti
EC REP	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve		Počet testov v súprave
	Nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený	REF	Katalógové číslo