


PRZED UŻYCIEM/PŘED POUŽITÍM/PRED POUŽITÍM

Sprawdź datę ważności na opakowaniu. Jeśli folika, w której znajduje się prezerwatywa jest w widoczny sposób uszkodzona, należy ją wyrzucić i użyć nowej prezerwatywy z nieuszkodzonego opakowania. Załóż prezerwatywę, zanim penis dotknie drugiej osoby. Pomaga to zapobiec ciąży i możliwości zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową podczas seksu vaginalnego, analnego i orального./Před použitím kondomu zkонтrolуйте датум jeho použiteľnosti na obale. Je-li obal kondomu zjavné porušený, kondom zlikvidujte a použijte iný z nepoškodeného obalu. Nasadte si kondom, nežže penis dotkne druhej osoby. Pomáha to zabrániť těhotenství a možnosti nákazy sexuálne prenosnými infekciami během vaginalního, analního nebo orálního sexu./Pred použitím prezervatív skontrolujte dátum jeho použiteľnosti na obale. Ak je obal prezervatív zjavné porušený, prezervativ zlikvidujte a použite iný z nepoškodeného obalu. Nasadte si prezervativ pred tým, ako sa penis dotkne druhej osoby. Pomáha to zabrániť těhotenstvu a možnosti nákazy sexuálne prenosnými infekciami počas vaginalného, analného alebo orálneho sexu.

INSTRUKCJA UŻYWANIA/POUŽITÍ KONDOMU/ POUŽITIE PREZERVATÍVU

- 1 Rozerwij folijkę od ząbkowanej krawędzi. Obchodzi się ostrożnie z prezerwatywą, gdyż może zostać uszkodzona paźnokciami lub ostryimi przedmiotami./Otvorte folii odtržením obalu od zoubkované hrany. Zacházejte s kondomem opatrne, protože byste jej mohli poškodit nehty nebo ostrými predmetami./Otvorte foliu odtrhnutim obalu od zoubkowanej hrany. S prezervativom narabajte opatrné, pretože ste ho mohli poškodiť nechtami alebo ostrými predmetmi.
- 2 Upewnij się, że zrolowana krawędź jest po zewnętrznej stronie. Ścisnij końcówkę i umieść prezerwatywę na czubku członka w stanie wzwodu. Se sirovanou časťi zvonku stisknite rezervoár a nasadte kondom na vrchol stoporeného penisu./So zrolowanou časťou zvonku stlačte rezervoár a nasadte prezervativ na vrchol stoporeného penisu./So zrolowanou časťou zvonku stlačte rezervoár a nasadte prezervativ na vrchol stoporeného penisu.
- 3 Rozwin prezerwatywę na całej długoci członka. Zatrzymaj się i sprawdź, czy prezerwatywa nie ześliszuję się lub nie przylega zbyt ścisłe do członka, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Należy zdjąć prezerwatywę zaraz po wytrysku. Mocno przytrzymaj prezerwatywę w podstawy członka przed jego wyciągnięciem./Srolujte dolu smarem ke kofeniu. Pokud se kondom nesroluje, může byt naruby; vyhodte jej a použijte nový. Přestáňte a zkонтrolуйте, zda nepocítujete, že kondom sklozává nebo svírá penis příliš těsně, protože to by mohlo vést k prasknutí. Těsně po ejakulaci je třeba kondom sejmout. Kondom před vytáhnutím penisu pevně přidržíte u kořene penisu. Zrolujte dolu smarem ku kořenu. Ak sa prezervativ nezroluje, môže byt naruby; vyhodte ho a použite nový. Počkajte a zkонтrolujte, či necítite, že sa prezervativ sklňava alebo zvieria penis príliš tesne, pretože to by mohlo vést k prasknutí. Tesne po ejakulácii je potrebné prezervativ stiahnuť. Prezervativ pred vytáhnutím penisu pevně pridržíavajte pri kořeni penisu.
- 4 Wrzuć do kosza. Nie wyrzucaj jej do toalety./Fólii a použitý kondom vyhodte do koše. Nesplachujte do toalety./Obal a použitý prezervativ vyhodte do koša. Nesplachujte do záchoda.

50023446

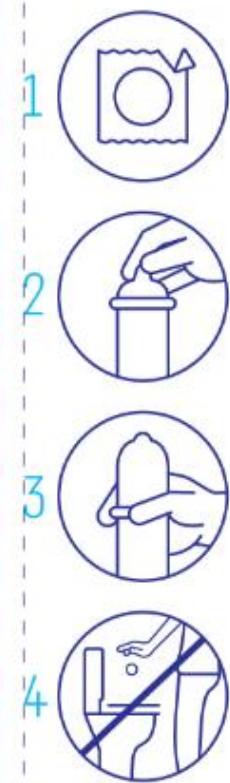

PRZECIWSKAZANIA/KONTRAINDIKACE/KONTRAINDIKÁCIE

Prezervatywa jest wykonana z naturalnego lateksu, który może powodować reakcję alergiczną, w tym wstrząs anafilaktyczny, jeśli użytkownik jest uczulony na lateks./Tyto kondomy jsou vyrobeny z prierodiného kaučukového latexu. Nepoužívajte je, pokud jste alergičtí na latex, protože môžu vyvolat alergickú reakciu včetne anafilaktického šoku./Tieto prezervatívy sú vyrobene z prierodne kaučukového latexu. Nepoužívajte ich, ak ste alergický na latex, pretože môžu vyvolat alergickú reakciu vrátane anafilaktického šoku.

KILKA OSTRZEŻEN/UPOMORNÉNÍ/UPOMORNENIA

ZAPRZESTAŃ UŻYWANIA: jeśli poczujesz dyskomfort lub podrażnienie podczas użycia prezerwatywy. Używaj prezerwatywy tylko raz. Ponowne użycie może zwiększać ryzyko uszkodzenia prezerwatywy i wystąpienia infekcji. Prezerwatywy mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli najpierw używasz prezerwatywy do seksu orального, należy użyć nowej prezerwatywy do każdego innego rodzaju seksu. Używaj tylko żeli intymnych zalecanych do używania z prezerwatywami. Te na bazie oleju (wazelina, oliwka dla niemowląt i niektóre pieszary) oraz niektóre leki miejscowe stosowane w okolicy członka lub pochwy mogą uszkodzić prezerwatywy. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy./PRESTÁNTE JEJ POUŽÍVATEĽ, pokud: pocitujete nepohodlne nebo podraždenie pri používaní kondomu. Kondom je pouze na jedno použitie. Opäťovné použitie môže zvýšiť riziko selhania nebo infekcie. Mohou mohu predstavovať nebezpečie udusenia. Uchovávajte mimo dosah detí. Jeliž použijete kondom nejprve k orálnemu sexu, použite po jakýkoli typu sexu, ktorý nasleduje, nový kondom. Používajte pouze lubrikanty doporučované pre používanie s kondomy. Lubrikanty na báze oleja (wazelina, detsky olej alebo niektoré lubrikanty na pesar) a niektoré lieky na vonkajšie použitie aplikované na penis alebo do vaginy môžu prezerwativ poškodiť. Pri analnom sexe použite ďalší lubrikáciu z vonkajšej strany prezerwativu.

KIEDY NALEŻY ZASIEGNĄĆ PORADY/KDY VYHLEDAT RADU/ KDY VYHĽADAŤ RADU

Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie masz pewności, czy jesteś uczulony/uczulona na lateks, jeśli podrażnienie lub dyskomfort utrzymują się po użyciu lub jeśli stosowane są miejscowe leki w obrębie członka lub pochwy. Jesili prezerwatywy pęknie lub przecieknie podczas stosunku należy jak najszybciejsz, w ciągu 72 godzin, skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem. Poważne incydenty medyczne należy zgłaszać firmie Reckitt i lokalnym właściwym władzom, które udzielają dalszych porad. Data opracowania instrukcji używania: Rev 03 (10/2020)./Poradte se s vým lekárom nebo lekárnikom, jestliže si nejste jisti, zda máte alergii na latex nebo po použití prieťavky podraždení či neprijemný pocit nebo používanie lekky v nejššom použití aplikované na penis nebo do vaginy. Jeliž kondom pri použití prosakuje nebo praskne, poradte se s vým lekárom nebo lekárom co nejdružie do 72 hodin. Nežiadoucí príhody musia byť nahlásené spoločnosti Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s.r.o. a príslušnému mestskému úradu, ktorý poskytne ďalšie rady. Dátum poslednej revízie návodu na použitie: október 2020.



Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania/Nepoužívajte, pokud je obal poškodený. Nepoužívajte, ak je obal poškodený.



Wyrob medyczny/ Zdravotnický prostriedok/ Zdravotnická pomocka



Chronić przed promieniowaniem słonecznym/Chránite pred slnečným žiarením/Chránite pred slnečným žiareniem