


PRZED UŻYCIEM/PRED POUŽITÍM/PRED POUŽITÍM

Sprawdź datę ważności na opakowaniu. Jeśli folijka, w której znajduje się prezerwatywa jest w widoczny sposób uszkodzona, należy ją wyrzucić i użyć nowej prezerwatywy z nieuszkodzonego opakowania. Załóż prezerwatywę, zanim penis dotknie drugiej osoby. Pomaga to zapobiec ciąży i możliwości zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową podczas seksu waginalnego, analnego oraz oralnego. Przed použitím kondomu zkontrolujcie datę jego użyteczności na obale. Jeśli obal kondomu zjevně porušený, kondom zlikvidujte a použijte jiný z nepoškozeného obalu. Nasadte si kondom, než se penis dotkne druhé osoby. Pomáhá to zabránit těhotenství a možnosti nákazy sexuálně přenosnými infekcemi během vaginálního, análního nebo orálního sexu. Pred použitím prezervatívu skontrolujte dátum jeho použiteľnosti na obale. Ak je obal prezervatívu zjavne porušený, prezervatív zlikvidujte a použite iný z nepoškodeného obalu. Nasadte si prezervatív pred tým, ako sa penis dotkne druhej osoby. Pomáha to zabrániť tehotenstvu a možnosti nákazy sexuálne prenosnými infekciami počas vaginálneho, análneho alebo orálneho sexu.

INSTRUKCJA UŻYWANIA/POUŽITÍ KONDOMU/POUŽITIE PREZERVATÍVU

- 1 Rozervij folijkę od ząbkowanej krawędzi. Obchodź się ostrożnie z prezerwatywą, gdyż może zostać uszkodzona paznokciami lub ostrymi przedmiotami. Otwórzte folię odtrząsnij od ząbkowanej krawędzi. Zachęć się z kondomem ostrożnie, ponieważ byście mogli poшкоdzić niechty lub ostrymi przedmiotami. Otvorte fóliu odtrhnutím obalu od zubkovej hrany. S prezervatívom narábajte opatrne, pretože by ste ho mohli poškodit nechťami alebo ostrými predmetmi.
- 2 Upewnij się, że zrolowana krawędź jest po zewnętrznej stronie. Ściągnij końcówkę i umieść prezerwatywę na czubku członka w stanie wzwodu. Se zrolovanou časťou zvonka stlačte rezervoár a nasadte kondom na vrchol ztoporeného penisu. So zrolovanou časťou zvonka stlačte rezervoár a nasadte prezervatív na vrchol stoporeného penisu.
- 3 Rozwiń prezerwatywę na całej długości członka. Zatrzymaj się i sprawdź, czy prezerwatywa nie ześlizguje się lub nie przylega zbyt ściśle do członka, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Należy zdjąć prezerwatywę zaraz po wytrysku. Mocno przytrzymaj prezerwatywę u podstawy członka przed jego wyciągnięciem. Śrołujcie dołu směrem ke kořenu. Pokud se kondom nesroluje, může být naruby; vyhodte jej a použijte nový. Přestaňte se zkontrolovat, zda nepocítujete, že kondom sklouzává nebo svírá penis příliš těsně, protože by to mohlo vést k prasknutí. Těsně po ejakulaci je třeba kondom sejmout. Kondom před vytáhnutím penisu pevně přidržíte u kořene penisu. Zrolujte dole smerom ku kořenu. Ak sa prezervatív nezroluje, môže byť naruby; vyhodte ho a použite nový. Počkajte a skontrolujte, či necítite, že sa prezervatív sklzáva alebo zvierá penis príliš tesne, pretože by to mohlo viesť k prasknutiu. Tesne po ejakulácii je potrebné prezervatív stiahnuť. Prezervatív pred vytiahnutím penisu pevne pridržiavajte pri koreni penisu.
- 4 Wrzuć do kosza. Nie wyrzućaj jej do toalety. Fólię a použitý kondom vyhodte do koše. Nesplachujte do toalety. Obal a použitý prezervatív vyhodte do koša. Nesplachujte do záchoda.

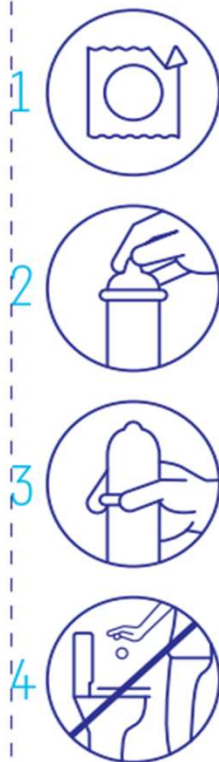

KILKA OSTRZEŻEŃ/UPOZORNIEŃ/UPOZORNENIA

Stosuj tylko żele intymne zalecane do użycia z prezerwatywami. Te na bazie oleju (wazelina, oliwka dla niemowląt i niektóre pesaria) oraz niektóre leki miejscowe stosowane w okolicy członka lub pochwy mogą uszkodzić prezerwatywę. **ZAPRZESTAN UŻYWANIA:** Jeśli odczuwasz dyskomfort lub podrażnienie podczas używania prezerwatywy. Używaj prezerwatywy tylko raz. Ponowne użycie może zwiększyć ryzyko uszkodzenia prezerwatywy i wystąpienia infekcji. Prezerwatywy mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli najpierw używasz prezerwatywy do seksu oralnego należy użyć nowej prezerwatywy do każdego innego rodzaju seksu. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy. Poużywajcie tylko lubrykanty doporęcane pro používání s kondomy. Lubrykanty na bázi oleje (vazelína, dětský olej nebo některé lubrykanty na pesar) a některé léky k vnějšímu použití aplikované na penis nebo do vagíny mohou kondomy poškodit. **PŘESTAŇTE JEJ POUŽÍVAT,** pokud pocítujete nepohodlí nebo podráždění při používání kondomu. Kondom je pouze na jedno použití. Opětovné použití může zvýšit riziko selhání nebo infekce. Kondomy mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Jestliže použijete kondom nejprve k orálnímu sexu, použijte pro jakýkoli typ sexu, který následuje, nový kondom. Při análním sexu použijte další lubrikaci na vnější stranu kondomu. Používejte iba lubrikanty odporúčané na použitie s prezervatívami. Lubrikanty na báze oleja (vazelína, dětský olej alebo niektoré lubrikanty na pesar) a niektoré lieky na vonkajšie použitie aplikované na penis alebo do vagíny môžu prezervatív poškodiť. **PŘESTAŇTE HO POUŽÍVAT** ak: cítite nepohodlie alebo podráždenie pri používaní prezervatívu. Prezervatív je iba na jedno použitie. Opätovné použitie môže zvýšiť riziko zlyhania alebo infekcie. Prezervatívy môžu predstavovať riziko udusenía. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak použijete prezervatív najprv na orálny sex, použite pre akýkoľvek typ sexu, ktorý nasleduje, nový prezervatív. Pri análnom sexe použite ďalšiu lubrikáciu z vonkajšej strany prezervatívu.

KIEDY NALEŽE ZASIĘGAĆ PORADY/KDY VYHLEDAT RADU/KEDY VYHLADAŤ RADU

Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą, jeśli wystąpi reakcja alergiczna lub jeśli podrażnienie lub dyskomfort utrzymują się po użyciu lub jeśli stosowane są miejscowe leki w okolicy członka lub pochwy. Jeśli prezerwatywa pęknie lub przecieknie podczas stosunku należy jak najszybciej, w ciągu 72 godzin, skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem. Poważne incydenty medyczne należy zgłaszać firmie Reckitt i lokalnym właściwym władzom, które udziela dalszych porad. Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže si nejste jisti, zda máte alergie na latex nebo po použití přetrvává podráždění či nepříjemný pocit nebo používáte léky k vnějšímu použití aplikované na penis nebo do vagíny. Jestliže kondom při použití praskne nebo praskne, poradte se se svým lékařem nebo lékařem co nejdříve do 72 hodin. Nežádoucí příhody musí být nahlášeny společnosti Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. a příslušnému místnímu úřadu, který poskytne další rady. Poradte sa so svojím lekárom alebo lekárníkom, ak ste si nie istý, či nemáte alergie na latex alebo po použití pretrváva podráždenie či nepriemný pocit alebo používate lieky na vonkajšie použitie aplikované na penis alebo do vagíny. Ak prezervatív pri použití praskne alebo praskne, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárom čo najskôr do 72 hodín. Nežiaduce príhody musia byť nahlásené spoločnosti Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o. a príslušnému miestnemu úradu, ktorý poskytne ďalšie rady.

Data opracowania instrukcji używania: Rev 04 (06/2021)

Datum poslední revize návodu k použití: červen 2021.

Datum poslednej revízie návodu na použitie: jún 2021.



Sprawdź instrukcję używania/Przeczytaj się návod k použití/Prečítajte si návod na použitie



Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania/Nepoužívajte, pokud je obal poškozený/Nepoužívajte, ak je obal poškodený



Uwaga/Pozor/Výstraha



Wyrób medyczny/Zdravotnický prostředek/Zdravotnícka pomôcka



Użyć tylko raz/Na jedno použití



Chronić przed wilgocią/Udržujte v suchu



Nie zawiera lateksu/kaučuku naturalnego/Neobsahuje prírodného kaučuku/latex/Neobsahuje prírodný kaučukový latex



Chronić przed promieniowaniem słonecznym/Chraňte pred slnečným žiarením