




SUPER HAFTCREME

Extra starker Halt und
schnelle Wirkung

Krümelschutz und erhöhter Tragekomfort

Für Voll- und Teilprothesen

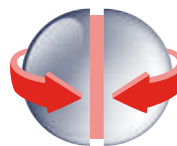


MEDIZINPRODUKT

ANWENDUNG:

- 1 Die Prothese gründlich reinigen und gegebenenfalls mit einer Bürste nacharbeiten.
- 2 Die Prothese vollständig abtrocknen.
- 3 Die Haftcreme in dünnen Streifen oder in Punkten entlang des Prothesenrands auftragen. Dabei ca. 1 cm Abstand vom Rand einhalten.
- 4 Die Prothese einsetzen und für ein paar Sekunden festdrücken. Für ca. 5 Minuten bitte nichts essen oder trinken.

Sollte nach dem Einsetzen der Prothese Haftcreme herausquellen, dann bitte bei der nächsten Anwendung die Menge reduzieren.

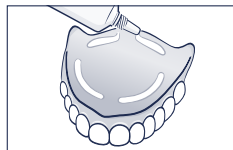

INHALTSSTOFFE:

CELLULOSE GUM,
HYDRO-
GENATED POLYDECENE,
HYDROGENATED
STYRENE/
ISOPRENE COPOLYMER,
CALCIUM/SODIUM
PVM/MA COPOLYMER,
AROMA, TOCOPHEROL,
CI 77491, LIMONENE.



HINWEISE: Bitte alle Hinweise sorgfältig lesen und beachten. Die Haftcreme nicht direkt in den Mund geben. Die Haftcreme außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Tubeninhalt und die Kanüle von Flüssigkeiten fernhalten und nach Gebrauch fest verschließen. Die Tube kühl und trocken aufbewahren. Die Haftcreme nicht verwenden, wenn gegen einen der genannten Inhaltsstoffe eine Überempfindlichkeit vorliegt. Die Faltschachtel zum Nachlesen aufbewahren. Den Sitz der Prothese regelmäßig vom Zahnarzt überprüfen lassen. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

IT Pasta super adesiva 75 g IMPIEGO: 1. Pulire a fondo la protesi, eventualmente servendosi di una spazzola. 2. Asciugare completamente la protesi. 3. Applicare la pasta adesiva sul bordo della protesi in strisce sottili o serie di punti. Mantenere un margine di circa 1 cm dal bordo. 4. Inserire la protesi e premere a fondo per alcuni secondi. Non mangiare né bere per circa 5 minuti. Se la pasta adesiva cola fuori dopo l'inserimento della protesi, ridurre la quantità di prodotto alla successiva applicazione. Pasta adesiva per protesi totali e parziali

AVVERTENZE: - Leggere e seguire attentamente tutte le avvertenze. - Non applicare la pasta adesiva direttamente in bocca. - Conservare la pasta adesiva fuori dalla portata dei bambini. - Tenere il contenuto del tubetto e la cannula applicatrice lontano da sostanze liquide e chiudere bene dopo l'uso. - Conservare il tubetto in un luogo fresco e asciutto. - Non usare la pasta adesiva in caso di ipersensibilità a uno degli ingredienti. - Conservare il foglietto illustrativo per riferimento futuro. - Far controllare regolarmente la sede della protesi da un dentista. - Eventuali inconvenienti gravi devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente. Fabbricante: etol Gesundheitspflege- und Pharmaprodukte GmbH, Konrad-Adenauer-Straße 3, DE-77704 Oberkirch, Domande: info@product-services.de +49 2241 23406 00 Dispositivo medico. Prodotto in Germania. Distribuito da dm drogerie markt s.r.l., Via G. Galilei n. 10, 39100 Bolzano (BZ). Per smaltimento imballo vedi dm-drogeriemarkt.it

HR **BiH** Krema za učvršćivanje 75 g UPORABA: 1. Temeljito očistite protezu i ako je potrebno dodatno je obradite četkicom. 2. Neka se proteza u potpunosti osuši. 3. Nanesite kremu za učvršćivanje Haftcreme u tankim trakicama ili točkama duž ruba proteze. Pritom zadržite razmak od oko 1 cm od ruba. 4. Umetnite protezu i pritisnite je na mjestu nekoliko sekundi. Nemojte ništa jesti ni piti oko 5 minuta. Ako krema za učvršćivanje Haftcreme iscuri nakon umetanja proteze, smanjite količinu prilikom sljedeće uporabe. Krema za učvršćivanje za totalne i djelomične proteze

UPOZORENJA: - Pažljivo pročitajte sve napomene i pridržavajte ih se. - Nemojte stavljati kremu za učvršćivanje izravno u usta. - Čuvajte kremu za učvršćivanje izvan pogleda i dohvata djece. - Držite sadržaj tube i kanilu dalje od tekućina i dobro zatvorite nakon upotrebe. - Pohranite tubu na hladnom i suhom mjestu. - Nemojte upotrebljavati kremu za učvršćivanje ako ste preosjetljivi na neki od navedenih sastojaka. - Sačuvajte sklopivu kutiju za buduću uporabu. - Neka vaš stomatolog redovito provjerava dosjed proteze. - Kritične situacije valja prijaviti proizvođaču i mjero-davnim tijelima. Proizvođač: etol Gesundheitspflege- und Pharmaprodukte GmbH, Konrad-Adenauer-Straße 3, DE-77704 Oberkirch, Pitanja: info@product-services.de +49 2241 23406 00; Distributer za HR: dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, 10090 Zagreb, www.dm.hr, tel. 0800-365 86 33.

CZ Super fixační krém 75 g POUŽITÍ: 1. Zubní náhradu důkladně vyčistěte, příp. použijte kartáček. 2. Zubní náhradu dokonale osušte. 3. Fixační krém naneste v tenkých prouzcích nebo bodově podél celého okraje zubní náhrady. Dodržujte přitom vzdálenost asi 1 cm od okraje. 4. Zubní náhradu vložte do úst, přitiskněte a několik sekund ji přidržíte na místě. Po dobu dalších přibližně 5 minut nejezte a nepijte. Pokud by po nasazení zubní náhrady krém vytékal, použijte napříště menší množství. Fixační krém na úplné a částečné zubní náhrady

VÝSTRAHY: - Přečtěte si prosím všechna upozornění a dodržujte je. - Fixační krém nenanášejte přímo na sliznici v ústech. - Fixační krém ukládejte mimo dohled a dosah dětí. - Obsah tuby a kanylu nevystavujte vlhkosti a po použití pevně uzavřete. - Tubu s krémem ukládejte na chladném a suchém místě. - Fixační krém nepoužívejte, jestliže jste citliví na některou z látek v něm obsažených. - Krabičku s informačním textem uschovejte pro případnou budoucí potřebu. - Stav zubní náhrady nechávejte pravidelně kontrolovat u zubního lékaře. - Závažné události musí být nahlášeny výrobci a příslušnému úřadu. Výrobce: etol Gesundheitspflege- und Pharmaprodukte GmbH, Konrad-Adenauer-Straße 3, DE-77704 Oberkirch, Dotazy: info@product-services.de +49 2241 23406 00 Vyrobeno v Německu. Distributor pro ČR: dm drogerie markt s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, ČR.

Vertrieb durch:
dm-drogerie markt
Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at



75 g e



etol Gesundheitspflege- und
Pharmaprodukte GmbH
Konrad-Adenauer-Straße 3
DE-77704 Oberkirch
Rückfragen: info@product-services.de
+49 2241 23406 00

CE 0483



PS-LAN: ZR0051

Stand der Information
Rev. 1 29.08.2024