




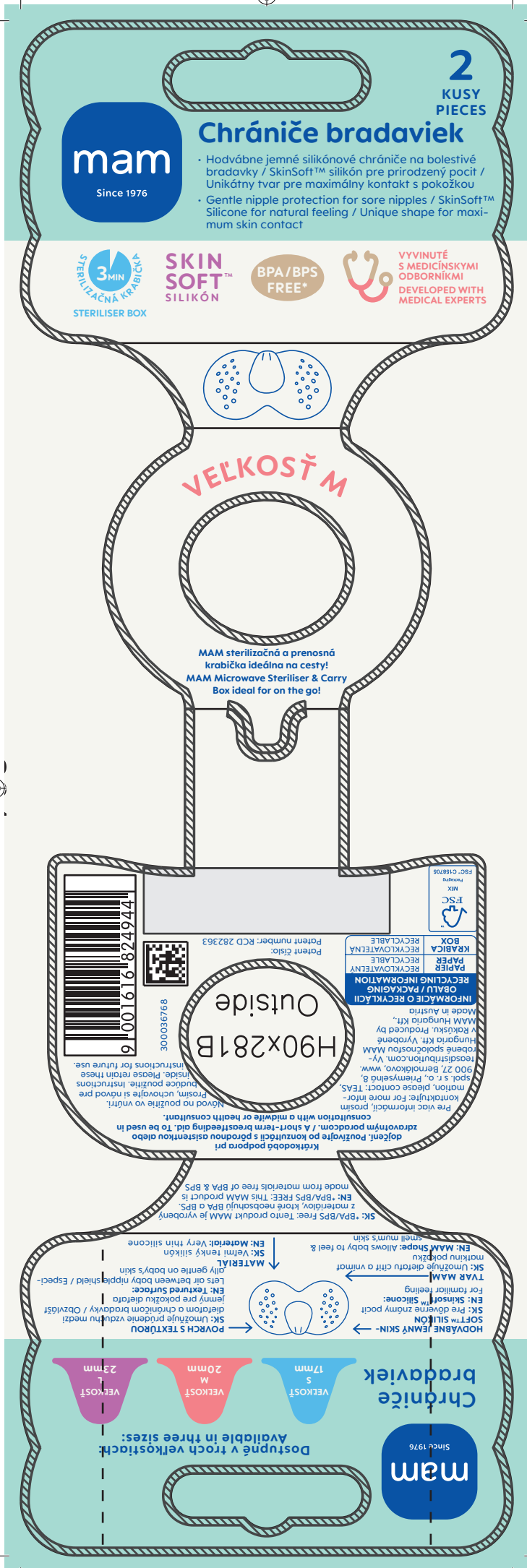

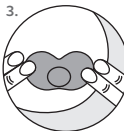

Čistenie a sterilizácia: Pred prvým a každým ďalším použitím chrániče vyčistite. Pred prvým použitím ich z hygienických dôvodov vyvarťte vo vriacej vode po dobu 5 minút. To je na zaručenie hygieny. Použite jednu z nasledujúcich metód sterilizácie: parná sterilizácia (elektrická alebo v mikrovlnnej rúre podľa návodu výrobcu), vyvarenie vo vriacej vode po dobu 5 minút alebo sterilizačný roztok. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Z hygienického dôvodu, po sterilizácii chráničov bradaviek ich uschovajte v zatvorenej vysušenjovanej krabičke. **Návod na použitie:** Pred každým použitím skontrolujte chrániče bradaviek a vymeňte ich pri prvom náznaku poškodenia.

1. Umyte si ruky.
2. Otočte krídla naruby.
3. Priložte na bradavku a vyhladte krídla.
4. Skontrolujte, či je chránič správne umiestnený na bradavke a pevne drží pred dojčením. Uistite sa, že nos a brada bábätka sú umiestnené v určených výrezoch.

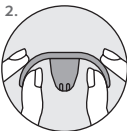

Pred prvým použitím sa poraďte s pôrodnou asistentkou alebo zdravotníckym odborníkom. Možno sterilizovať v autokláve (do 134°C, do 18 minút).

Upozornenia – pre bezpečnosť vášho dieťaťa! Nepoužívajte chrániče bradaviek ako upokojujúci cumec alebo cumec na fľašu. Nevyrézajte tvar chráničov bradaviek. Držte mimo dosahu detí.

Sterilizačná krabica: Návod na použitie:

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu a akékoľvek nálepky. Pred použitím umyte chrániče bradaviek a krabičku s mydlou vodou a opláchnite ich čistou vodou. To je na zaručenie hygieny samosterilizáciu. Keď použijete, prosím uistite sa, že chrániče bradaviek, krabička a mikrovlnná rúra (vrátane KOMPLETENE čistôt, zvyškov alebo olejových nečistôt, mohlo peniu výrobu alebo zhoreniu Najprv podržte plňte ju 15 ml / po mierku. Potom chrániče bradaviek do krabičku a zohrejte v mikrovlnnej rúre na 750 – 1000 wattov po dobu 3 minút. Je možné sterilizovať až 2 krabičky naraz. Postupujte podľa používateľskej príručky mikrovlnnej rúry. Neukladajte sterilizačnú krabičku do stredu otočného taniera. Počas sterilizácie nenechávajte mikrovlnnú rúru bez dozoru! Ak sa voda odparí, okamžite zastavte proces sterilizácie. Nechajte vychladnúť najmenej 3 minúty. Otvorte mikrovlnnú rúru. POZOR! Krabica, voda a chrániče bradaviek môžu byť stále veľmi horúce po 3 minútach chladenia! Po mikrovlnnej sterilizácii ostanú chrániče bradaviek v uzatvorenej krabičke sterilné až 48 hodín. Pre okamžité použitie, otvorte krabičku a vylejte zvyšnú vodu. Chrániče bradaviek nechajte vyschnúť v mierne otvorenej krabičke. Pred použitím skontrolujte teplotu chráničov! Nesprávna úroveň vody, zle nastavená výkonnosť alebo čas sterilizácie, môže poškodiť mikrovlnnú rúru, chrániče bradaviek, krabičku a môže viesť k zlej dezinfekcii! Len pre používanie MAM Chráničov bradaviek! Udržujte sterilizačnú krabičku mimo dosahu detí.

Manufacturer:

MAM Baby AG, Sihleggstrasse 15,
8832 Wollerau, Switzerland
www.mambaby.com,
Phone: +41 4478/6983

Inside

EU Responsible Person:

MAM-Hungária Kft., Fő út 132. 9795,
Vaskeresztes, Hungary
www.mambaby.com,
Phone: +36 94 540100



Warnings – for your child's safety! Do not use the nipple shields as a soother or teat. Do not cut the shape of the nipple shield. Keep out of the reach of children.

1. Wash your hands.
2. Invert the wings.
3. Place on nipple and smooth out wings.
4. Check that the shield fits the nipple and is firmly attached before breastfeeding. Make sure that the baby's nose and chin are positioned in the cut-outs provided. Before first use contact a midwife or health consultant. Can be sterilised in an autoclave (up to 134°C, up to 18 min).

EN: Cleaning and sterilising: Clean nipple shields before first and each use. Before first use place nipple shields in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Sterilise using one of the following methods: steam sterilising (electric or microwave according to manufacturers instructions), boiling in water for at least 5 minutes or liquid sterilising solution. Do not use abrasive cleaning agents. In order to store the sterilised nipple shields hygienically, keep them in the closed sterilised carry box. **Instructions for use:** Inspect the nipple shields before each use and replace at the first signs of damage.

