

acti PROCT®

Klinisch nachgewiesene, schnelle Linderung bei Hämorrhoiden*

Gel

Die Formel von ActiProct® Gel gegen Hämorrhoiden lindert klinisch nachweislich Hämorrhoidalbeschwerden wie Juckreiz, Schmerzen und Entzündungen und verbessert den Komfort, auch beim Stuhlgang.

5-fache Wirkung:

- Lindert Hämorrhoiden und Analbeschwerden
- Reduziert Entzündungen
- Lindert Schmerzen
- Lindert den Juckreiz
- Schützt vor Reizungen und Spannungen beim Stuhlgang

ActiProct® lindert klinisch nachweislich Beschwerden bei Hämorrhoiden und im Analbereich. Es kühlt schnell innerhalb von 60 Sekunden. ActiProct® ist dank des handlichen und hygienischen Designs einfach in der Anwendung.

Anwendungsgebiete

ActiProct® Gel ist klinisch nachweislich wirksam bei der Linderung von Juckreiz, Reizungen, Schmerzen, Entzündungen und Brennen. Die Gel Formel von ActiProct® gegen Hämorrhoiden enthält natürliche Inhaltsstoffe für eine beruhigende Wirkung, bekannt für ihre kühlenden und juckreizlindernden Eigenschaften, wie z. B. den natürlichen 2QR-Komplex, gewonnen aus Aloe Vera.

So wirkt ActiProct® Gel

ActiProct® Gel basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen und hat einen sofortigen Kühleffekt, der Linderung und Erleichterung verschafft und nachweislich Schmerzen und Beschwerden beim Stuhlgang verringert. Der 2QR-Komplex, der aus Aloe vera gewonnen wird, bildet eine physikalische Schutzbarriere und eine Gleitwirkung zur Erleichterung des Stuhlgangs.


Gebrauchsanweisung:

Mit dem Applikator mindestens zweimal täglich oder nach jedem Stuhlgang in ausreichender Menge auf und um die betroffene Stelle auftragen, über einen Zeitraum von zwei Wochen oder wann immer eine Linderung erforderlich ist. Eine häufigere Anwendung erhöht die Wirksamkeit.


Tragen Sie das Produkt intern mit dem in der Packung enthaltenen Kanülenapplikator auf. Reinigen Sie den Applikator nach der Anwendung.

mit warmem Wasser und setzen Sie die Schutzkappe auf. Verschließen Sie die Dose nach dem Gebrauch wieder fest, um ein Austrocknen des Gels zu verhindern.

Zur Anwendung von ActiProct® folgen Sie den Anweisungen in den nachstehenden Abbildungen:

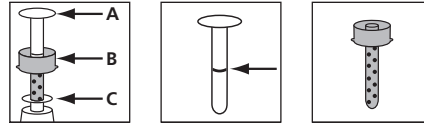


Schritt 1. Entfernen Sie die Kappe. Platzieren Sie die Sprühdose sicher auf einem Tisch oder einer ebenen Fläche. Drücken Sie nicht auf den weißen Knopf.

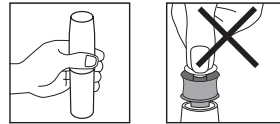


Schritt 2. Halten Sie die Dose in der Hand und drücken Sie den blauen Teil (B) fest nach unten (Sie hören ein zischendes Geräusch), bis Sie sehen, dass ein Ring auf dem weißen Teil (A) erscheint. Dies dauert in der Regel 2 Sekunden. Sie werden bemerken, dass sich der weiße Teil (A) automatisch nach oben bewegt hat. Der Applikator ist nun vollständig befüllt und kann verwendet werden.



Schritt 3. Ziehen Sie die Applikatorteile aus der Halterung (Teil C).

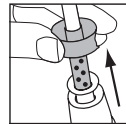

Schritt 4. Führen Sie den blauen Teil (B) in den Anus ein, drücken Sie den weißen Teil (A) nach unten und geben Sie das ActiProct® Gel in den betroffenen Bereich frei.

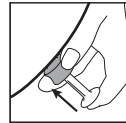

Nach der Behandlung:

Waschen Sie die beiden Applikatorteile nach jedem Gebrauch getrennt mit warmem Wasser. Wischen Sie Teil C ab. Setzen Sie den Applikator wieder in den gereinigten Teil C ein und verschließen Sie ihn mit der Kappe.

Warnhinweise:

Extrem entflammbar. Behälter steht unter Druck und kann bei Erwärmung platzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht in unmittelbarer Nähe rauchen. Nicht in eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Die Sprühdose nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Applikator verwenden. Falls Sie medizinische Beratung benötigen, zeigen Sie bitte den Behälter oder das Etikett des Präparats vor. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie gegenüber einem oder mehreren der Inhaltsstoffe empfindlich sind. ActiProct® Gel sollte nicht länger als 30 Tage ununterbrochen in einem Behandlungszeitraum angewendet werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, wenn Sie anhaltend unter Hämorrhoiden leiden oder übermäßige Blutungen haben.

ActiProct® Gel basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen:

Die besondere Formulierung von ActiProct® Gel enthält den natürlichen 2QR-Komplex. Das Gel enthält keine Lokalanästhetika, ist kortisonfrei, parfümfrei und enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs.

Inhaltsstoffe:

Aqua, 2QR-Complex* (40%), PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9 (1%), Phenoxethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate.

*Gereinigt aus Aloe Barbadensis Blattextrakt

Wechselwirkungen mit Medikamenten:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Es sind keine Nebenwirkungen bei der Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit bekannt.

Kinder:

Es sind keine Nebenwirkungen bei der Anwendung bei Kindern bekannt. Besprechen Sie die Anwendungsmöglichkeiten mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Aufbewahrung:

ActiProct® Gel sollte bei Raumtemperatur (10–25 °C) verwendet werden. An einem sicheren und kühlen Ort aufbewahren. Nach Ablauf des auf der Dose und auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Inhalt:

45 ml Sprühdose mit ActiProct® Gel + Applikator + Gebrauchsinformation.

Im Falle eines schwerwiegenden Vorkommnisses informieren Sie bitte den Hersteller und die für Ihren Wohnsitz zuständige nationale Behörde.

Entsorgung:

Die Kappe und der Applikator sollten als Kunststoff, der Karton als Papier, und die Dose sollte mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen finden Sie auch in den örtlichen Vorschriften.

*Sofortiger Kühleffekt

Diese Gebrauchsanweisung wurde erstellt im: Februar 2026

acti PROCT®

Soulagement cliniquement prouvé des hémorroïdes*

Gel

La formule du gel ActiProct® contre les hémorroïdes a fait ses preuves, en milieu clinique, contre les gênes dues aux hémorroïdes, en apaisant les démangeaisons, douleurs, inflammations, pour soulager, même pendant le passage des selles.

5 niveaux d'action :

- Soulage les hémorroïdes et les inconforts anaux
- Réduit l'inflammation

- Diminue la douleur
- Apaise les démangeaisons
- Protège contre l'irritation et le frottement lors des visites aux toilettes

ActiProct® soulage cliniquement les symptômes liés aux hémorroïdes et aux inconforts anaux. Il procure un effet rafraîchissant rapide en 60 secondes. ActiProct® est facile à utiliser grâce à son format pratique et hygiénique.

Indication

L'efficacité du gel ActiProct® dans le soulagement des symptômes tels que démangeaisons, irritations, douleurs, inflammations et sensations de brûlure a été démontrée en milieu clinique. La formule du gel ActiProct® contient des ingrédients naturels apaisants, connus pour leurs propriétés rafraîchissantes et anti-démangeaisons, tels que le complexe naturel 2QR, extrait de l'Aloe Vera.

Action du gel ActiProct®


Le gel ActiProct® est à base d'ingrédients naturels et a un effet rafraîchissant instantané cliniquement prouvé qui apporte soulagement et confort et qui réduit douleur et gêne lors des passages aux toilettes. Le complexe 2QR, extrait de l'Aloe Vera, crée une barrière protectrice physique et un effet lubrifiant qui facilitent la défécation.

Conseils d'utilisation :


À l'aide de l'applicateur, appliquez une bonne quantité de gel à l'intérieur et à l'extérieur de la zone affectée au moins deux fois par jour ou après chaque passage des selles, pendant une période de deux semaines ou chaque fois que le soulagement est souhaité. Le gel peut être appliqué plus fréquemment pour plus d'efficacité.

Appliquez le produit à l'intérieur de l'anus à l'aide de l'applicateur à canule fourni dans l'emballage du produit. Après utilisation, nettoyez l'applicateur à l'eau chaude et remplacez le capuchon protecteur. Refermez bien l'aérosol après utilisation afin d'éviter que le gel ne sèche.



Pour appliquer ActiProct®, suivez les instructions illustrées ci-dessous :

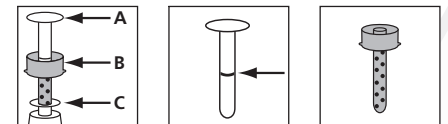


Étape 1. Retirez le bouchon. Posez l'aérosol sur une table ou autre surface plane en le tenant fermement. N'appuyez pas sur le bouton blanc.

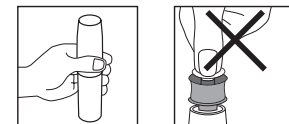


Étape 2. Tout en tenant l'aérosol fermement, appuyez sur la partie bleue (B) (vous entendrez un sifflement) jusqu'à ce que vous voyiez un anneau apparaître dans la partie blanche (A). Généralement, cette action prend 2 secondes. Vous remarquerez que la partie blanche (A) est montée automatiquement. L'applicateur est maintenant entièrement chargé et prêt à être utilisé.

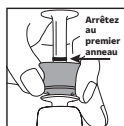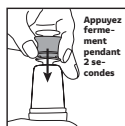

Étape 3. Dépliez l'applicateur en le faisant sortir de son support (partie C).

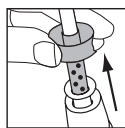

Étape 4. Insérez la partie bleue (B) dans l'anus, en appuyant sur la partie blanche (A) afin de déposer le gel ActiProct® dans la zone affectée.

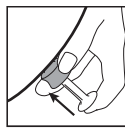

Après traitement :

Après chaque utilisation, lavez séparément les 2 parties de l'applicateur à l'eau chaude. Nettoyez la partie C en l'essuyant. Remplacez l'applicateur dans la partie C nettoyée, puis refermez-la à l'aide du bouchon.

⚠️ Avertissements :

Aérosol extrêmement inflammable. Conteneur pressurisé : Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou une autre source d'ignition. Ne pas percer ni brûler, même après utilisation. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F. Utiliser l'aérosol seulement avec l'applicateur fourni. Si vous devez consulter un médecin, assurez-vous d'avoir le conteneur ou l'étiquette du produit à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser ce produit si vous êtes sensible à un ou plusieurs de ses ingrédients. Le gel ActiProct® ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours consécutifs pour la même période de traitement. Si vous continuez à souffrir d'hémorroïdes ou de saignements excessifs, consultez votre médecin.

Le gel ActiProct® est à base d'ingrédients naturels :

La formule unique du gel ActiProct® contient le complexe naturel 2QR. Elle ne contient pas d'anesthésiant local, de cortisone, de parfum ni d'ingrédients d'origine animale.

Ingrédients :

Aqua, 2QR-Complex* (40%), PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9 (1%), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate.
*Extrait de feuille d'Aloe barbadensis purifié

Interactions avec les médicaments :

Il n'y a aucune interaction connue avec d'autres médicaments.

Grossesse et allaitement :

Aucun effet secondaire n'est connu lors l'utilisation durant la grossesse ou l'allaitement.

Enfants :

Aucun effet secondaire n'est connu lors l'utilisation chez les enfants. Demandez conseil à votre médecin.

Conservation :

Le gel ActiProct® doit être utilisé à température ambiante (10-25 °C). Conservez-le dans un lieu frais et sûr. Ne l'utilisez pas après la date d'expiration figurant sur le haut de l'aérosol et sur l'emballage.

Contenu de l'emballage :

Aérosol de 45 ml de gel ActiProct® + applicateur + instructions d'utilisation

En cas d'incident grave, veuillez informer le fabricant et l'autorité nationale compétente de votre lieu de résidence.

Élimination :

Le bouchon et l'applicateur doivent être recyclés en tant que plastique, le carton en tant que papier, et l'aérosol doit être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires. Reportez-vous également à vos réglementations locales pour de plus amples informations.

*Effet rafraîchissant instantané

Ces instructions d'utilisation ont été émises le : Février 2026

IT

Prima di utilizzare ActiProct® Gel si prega di leggere con attenzione questo foglietto illustrativo. Tenerlo a portata di mano per un'eventuale consultazione. Per qualsiasi domanda o perplessità, si prega di rivolgersi al proprio medico o farmacista di fiducia.

acti PROCT®

Sollievo dalle Emorroidi clinicamente testato*

Gel

ActiProct® Gel è una formula clinicamente testata per il trattamento delle emorroidi in grado di alleviare il fastidio creato dalla presenza delle emorroidi, calmando il prurito, il dolore e l'infiammazione e garantendo maggiore comfort, perfino durante l'evacuazione.

5 modalità d'azione:

- Allevia le emorroidi e le sensazioni di fastidio anale
- Riduce l'infiammazione
- Allevia il dolore
- Calma il prurito
- Protegge dall'irritazione e dalla frizione quando si va in bagno

ActiProct® è clinicamente testato per alleviare i sintomi associati alle emorroidi e le sensazioni di fastidio anale. Offre un effetto rinfrescante rapido, già dopo 60 secondi. ActiProct® è di facile uso, grazie al formato comodo e igienico.

Indicazioni

È stato clinicamente dimostrato che ActiProct® Gel è in grado di alleviare efficacemente i sintomi associati alle emorroidi, come prurito, irritazione, dolore, infiammazione e bruciore. La formula di ActiProct® Gel contiene componenti naturali lenitivi, noti per le loro proprietà rinfrescanti e anti-prurito, come il complesso naturale 2QR, estratto dall'Aloe vera.

Come funziona ActiProct® Gel




ActiProct® Gel è a base di ingredienti naturali e ha un effetto rinfrescante immediato che offre sollievo e comfort. Inoltre è stato dimostrato che riduce il dolore e la sensazione di fastidio quando si va in bagno. Il complesso 2QR, estratto dall'Aloe vera, crea una barriera fisica protettiva e ha un effetto lubrificante che agevola le evacuazioni.

Istruzioni per l'uso:



Applicare una quantità adeguata sull'area interessata e nella zona circostante utilizzando l'applicatore, almeno due volte al giorno o dopo ogni evacuazione, per due settimane o quando si desidera sollievo. Aumentando la frequenza di applicazione si aumenta l'efficacia.

Applicare il prodotto internamente utilizzando la cannula applicatore inclusa nella confezione del prodotto. Dopo l'uso, pulire l'applicatore con acqua tiepida e posizionare il cappuccio protettivo. Chiudere saldamente la bomboletta dopo l'uso per evitare che il gel si secchi.



Per applicare ActiProct® seguire le istruzioni come mostrato nelle illustrazioni di seguito:

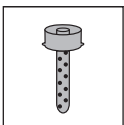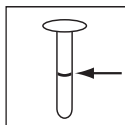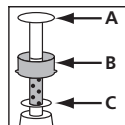


Passaggio 1. Rimuovere il tappo. Posizionare saldamente la bomboletta spray su un tavolo o su una superficie piana. Non premere il pulsante bianco.

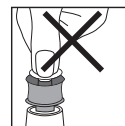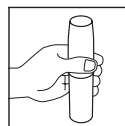


Passaggio 2. Tenendo ferma la bomboletta, premere con forza sulla parte blu (B) (si avverte un sibilo) fino a quando non compare un anello sulla parte bianca (A). In genere sono necessari 2 secondi. La parte bianca (A) si sposta automaticamente verso l'alto. A questo punto, l'applicatore è completamente carico e pronto per l'uso.

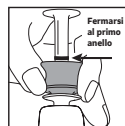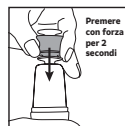

Passaggio 3. Estrarre i componenti dell'applicatore dal supporto (parte C).

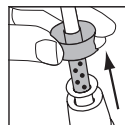

Passaggio 4. Inserire la parte blu (B) nell'ano, quindi premere la parte bianca (A) per applicare ActiProct® Gel sull'area interessata.

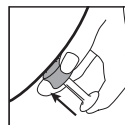

Dopo il trattamento:

Dopo ogni utilizzo, lavare separatamente le 2 parti dell'applicatore con acqua tiepida. Pulire con un panno la parte C. Reinserrire l'applicatore nella parte C pulita e riposizionare il tappo per chiuderlo.

⚠️ Avvertenze

Bomboletta spray altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: se riscaldato potrebbe esplodere. Tenere lontano da calore, superfici roventi, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare o bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. Utilizzare la bomboletta spray solo in combinazione con l'applicatore in dotazione.

Se è necessario consultare un medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare questo prodotto in caso di sensibilità a uno o più componenti. Non utilizzare ActiProct® Gel per più di 30 giorni consecutivi per ogni ciclo di trattamento. Consultare il proprio medico se si soffre di emorroidi in modo continuativo o se si verifica sanguinamento eccessivo.

ActiProct® Gel è a base di componenti di origine naturale:

La formulazione unica di ActiProct® Gel contiene il complesso naturale 2QR. Non contiene anestetici locali ed è privo di cortisone e profumi. Inoltre non contiene componenti di origine animale.

Ingrédients:

Aqua, 2QR-Complex* (40%), PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9 (1%), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate.
*Purificato da estratto di foglie di Aloe Barbadensis

Interazioni con farmaci:

Non sono note interazioni con altri farmaci.

Gravidanza e allattamento:

Non sono noti effetti collaterali durante l'uso in gravidanza o durante l'allattamento.

Bambini:

Non sono noti effetti collaterali quando utilizzato nei bambini. Si consiglia di consultare il proprio medico per valutare le opzioni terapeutiche.

Conservazione:

ActiProct® Gel deve essere utilizzato a temperatura ambiente (10-25 °C). Conservare in un luogo sicuro e fresco. Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla parte superiore della bomboletta e sulla confezione.

Contenuto:

Bomboletta spray da 45 ml contenente ActiProct® Gel + applicatore + istruzioni per l'uso

Qualora si verificasse un incidente grave, si prega di informare il produttore e l'autorità nazionale competente del luogo di residenza.

Smaltimento:

Il tappo e l'applicatore devono essere riciclati come plastica, l'astuccio come carta e la bomboletta deve essere smaltita con i rifiuti domestici. Consultare le normative locali per maggiori informazioni.

*Effetto rinfrescante immediato

Queste istruzioni per l'uso sono state stampate il: Febbraio 2026



Hersteller/ Fabricant/ Produttore:
YouMedical B.V.
Barbara Strozziilaan 201
1083HN Amsterdam
Niederlande/Pays-Bas/
Paesi Bassi

Hergestellt in den
Niederlanden
Fabriqué aux Pays-Bas
Fabbriato nei Paesi Bassi

PZN DE: 19386048
PZN AT: 5890599
Pharmacode CH:
1115904
2004216_2
59-34035-0403



Gefahr. Extrem
entflammbar.
Danger. Aérosol
extrêmement
inflammable.
Pericolo.
Bomboletta spray
altamente
inflammabile.