

Gebrauchsanweisung: Zu desinfizierende Oberflächen mit dem MAM Hygienetuch abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, um eine optimale Desinfektionswirkung zu gewährleisten. Für Oberflächen bis zu 0,5 m².
Nach Ablauf der Einwirkzeit (s. Anwendungstabelle) ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen. Desinfizierte Gegenstände, die in den Mund genommen werden, nach der Reinigung trocken abwischen. Zur Sicherstellung der Desinfektionswirkung Vorverschmutzungen mit einem gesonderten Hygienetuch vor der Anwendung entfernen. Die Tücher können nach Erstöffnung bis zu 30 Tage verwendet werden, insoweit das Verfallsdatum (s. Aufdruck auf Verpackung) nicht überschritten wird.
Wirksamkeit: Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2), Norovirus, Polymavirus/SV40 und Rotavirus.
Zusammensetzung: In 100 g Flüssigkeit enthalten: 0,25 g Dialkyldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Benzalkoniumchlorid, 0,25 g Alkyldimethyl (ethylbenzyl) ammoniumchlorid.
Warnhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
Entsorgung: Die Tücher nach Gebrauch im Restmüll entsorgen. Leere Verpackung im Restmüll entsorgen.*

*Auslobung gemäß Biocidprodukteverordnung (VBP/BPR) / **Nicht-invasiv

FR : Instructions d'utilisation : Essuyer les surfaces à désinfecter avec la lingette hygiénique MAM. Veiller à un mouillage complet pour garantir une désinfection optimale. Pour des surfaces jusqu'à 0,5 m². Une fois le temps d'action écoulé (voir tableau d'application), essuyer avec un chiffon jetable si nécessaire. Tout objet destiné à être mis dans la bouche doit être essuyé après le nettoyage. Pour une désinfection efficace, éliminer d'abord les saletés avec une autre lingette hygiénique. Jeter les lingettes avec les déchets résiduels après utilisation. Les lingettes hygiéniques MAM peuvent être utilisées dans un délai de 30 jours après ouverture de l'emballage, pour autant que la date limite d'utilisation (voir date imprimée sur l'emballage) n'est pas dépassée.

Composants : Pour 100 g de liquide : 0,25 g chlorure de dialkyldiméthylammonium, 0,25 g de chlorure de benzalkonium, 0,25 g de chlorure d'alkyldiméthyl (éthylbenzyl) ammonium.

Efficacité : Bactéricide, levuricide et virucide à action limitée (VIH, hépatite B, hépatite C, grippe, SARS-CoV-2), norovirus, polymavirus/SV40 et rotavirus
Avertissement : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Tenir hors de portée des enfants. En cas de doute ou en présence de symptômes, consulter un médecin.

Élimination : Élimination conformément aux dispositions réglementaires.*

*Conforme à l'ordonnance sur les produits biocides (OPBio/RBP) / **Non invasif

Einwirkzeiten

FR : Temps d'action:

IT: Tempi di azione:

Wirkpektrum, Spectro d'efficacia, Spettro di efficacia	Konzentration, Concentration, Concentrazione	Einwirkzeit, Temps d'action, Tempo di azione
Bakterizidie/ Levurozidie Bactéricide/ Levuricide Battericida/ Levuricida	EN 13727, EN 13624, EN 16615	unverdünnt non dilué non diluito
Begrenzt viruzid Virucide à action limitée Limitatamente virucida	EN 14476	unverdünnt non dilué non diluito
Norovirus Norovirus Norovirus	EN 14476	unverdünnt non dilué non diluito
SV40/ Polymavirus SV40/ Polymavirus SV40/ Polymavirus	EN 14476	unverdünnt non dilué non diluito
Rotavirus Rotavirus Rotavirus	EN 14476	unverdünnt non dilué non diluito

mam

Since 1976



HYGIENISCH
Für Medizinprodukte
(Stillhilfen, Fieber-
thermometer, o.ä.)**



KRAFTVOLL
Wirksam gegen
Bakterien und
behüllte Viren
(Grippe, Corona)



**ELTERN-
EMPFEHLUNG***
*Eltern-Produkttest/
Test produit parents/
Prodotto testato dai
genitori 2017, n=76

24
Tücher
Lingettes
Salviette

Hygienetücher Lingettes hygiéniques Salviette igieniche

- Zur Desinfektion von wasserfesten Oberflächen* und Medizinprodukten (Stillhilfen, Fieberthermometer, o.ä.)**
- Zur Desinfektion von Babyzubehör*, z.B. Babywaagen
- Materialschonend
- Dermatologisch getestet, ohne Duft- und Farbstoffe, alkoholfrei

- Pour la désinfection de surfaces hydrofuges* et de dispositifs médicaux (p-ex. aides à l'allaitement, thermomètre)**
- Pour la désinfection d'accessoires pour bébé*, par ex. pèse-bébés
- Sans danger pour les matériaux
- Testées dermatologiquement, sans parfums ni colorants, sans alcool

- Per la disinfezione di superfici impermeabili* e di dispositivi medici (ausili per l'allattamento, termometro per febbre, o sim.)**
- Per la disinfezione degli accessori per neonati*, ad es. bilancia per neonati
- Delicato sui materiali
- Dermatologicamente testati, senza profumi e coloranti, senza alcol

IT: Istruzioni per l'uso: Pulire le superfici da disinfettare con la salvietta igienica MAM. Assicurarsi che sia completamente bagnata, per garantire un effetto disinfettante ottimale. Per superfici fino a 0,5 m². Una volta trascorso il tempo di azione (v. tabella di utilizzo), ripassare con un panno monouso, se necessario. Gli oggetti che vengono messi in bocca, dopo averli puliti con le salviette, devono essere puliti a secco. Per garantire l'effetto disinfettante, prima dell'uso rimuovere l'eventuale sporca con una salvietta igienica a parte. Dopo l'uso, smaltire le salviette nei rifiuti indifferenziati. Le salviette igieniche MAM possono essere usate fino a 30 giorni dopo l'apertura della confezione, a condizione che non venga superata la data di scadenza (v. data riportata sulla confezione).

Composizione chimica: per 100 g di prodotto liquido: cloruro di dialchilidimetilammonio 0,25 g, cloro di benzalciano 0,25 g, alchil dimetil (etilbenzil) ammonio cloruro 0,25 g.

Efficacia: Battericida, levuricida e limitatamente virucida (HIV, HBV, HCV, influenza, SARS-CoV-2), norovirus, poliomavirus/SV40 e rotavirus.

Avvertenza: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In qualsiasi caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

Smaltimento: Smaltire in conformità alle norme delle autorità in materia.*

*Descrizione conforme all'ordinanza sui biocidi (OBioC/BPR) / **Non invasivo

Biocid Reg.-Nr.: N-113047
Zulassung CH: CHZN7248

[REF] 20570005-002
951506 Rev. A – 20231103

DE: Für weitere Informationen:
MAM Babyartikel GmbH,
Rudolf-Diesel-Str. 6-8, D-27383 Scheeßel
DE: 0800-2229626, info@mam-babyartikel.de
AT: 0800-900090, kundenservice@mambaby.com
MAM Baby AG, Sihleggstr. 15, CH-8832 Wollerau,
Ph: +41 44 787 69 90, consumer.ch@mambaby.com



MAM Babyartikel GmbH
Made in EU



NW-Chemie GmbH
Langbaugstr. 15
53842 Troisdorf

mambaby.com

UFI: P890-NTFW-C3MS-TY1J



LDPE/PP



1M




0044



PRODUKT ENTHÄLT KUNSTSTOFF

PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE
PLASTICA NEL PRODOTTO

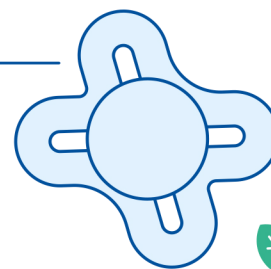

VEGAN